



包括 919 的 Eco IC Package

2.925.1040

用于水分析和教学的自动化入门型号。IC Eco Package 可以随时加装英蓝超滤。标准配置包括 Eco IC、919 IC Autosampler plus、电导检测器、Metrohm Suppressor Module «MSM» 以及 MagIC Net Professional 软件。

Scope of delivery 2.925.1040

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.850.9010	IC Conductivity Detector

用于智能型离子色谱仪的紧凑智能型高性能电导检测器。卓越的温度稳定性，受保护的检测器端子板内的整个信号处理过程以及最新一代的 DSP（数字式信号处理）均能确保测量的精确性。归功于动态工作范围，无需进行范围变更（也不是自动进行）。



1 PCS 1.919.0020 919 IC Autosampler plus

919 IC Autosampler plus 满足实验室内处理中等样品量的要求。使用该仪器，可实现万通产品的各种离子色谱分析自动化。



1 PCS 1.925.0020 Eco IC

全能的离子色谱！Eco IC 是入门版离子色谱仪，价格非常合理。该设备特别适合于学校、大学中的常规用途和教学用途的水分析。其标准配置包括电导检测器、万通抑制器模块 «MSM» 和软件。随时可以在之后针对最多 36 个试样自动化，并使用英蓝超滤。



1 PCS 6.1453.250 塑料材质的样品杯 (PP) 250 mL, 1 个

塑料材质的样品杯（聚丙烯，PP）250 mL，适用于样品架 6.2041.310、6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、6.2041.820、6.2068.020 和 6.2068.030，1 个



1 PCS 6.1602.150 瓶盖 / GL 45 - 3 x UNF 10/32

用于 1/16 英寸毛细管接口连接。应用在 MSM 助溶剂以及万通在线渗析中。



1 PCS 6.1602.160 淋洗液和试剂用瓶盖 GL 45

用于淋洗液瓶、试剂瓶和冲洗瓶，带有可用于吸附管及吸液管的接口。



1 PCS 6.1608.020 试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45
辅助溶液瓶



1 PCS 6.1608.070 淋洗液瓶 / 2升 / GL 45



1 PCS 6.1609.000 干燥管，大尺寸，弯曲型
用于填充吸收剂材料。



2 PCS 6.1803.030 PTFE 毛细管，内径 0.5 毫米 / 3 米
毛细管，用于在线渗析，用在渗析单元、渗析式IC样品处理器、IC液体处理渗析单元上



1 PCS 6.1803.040 PTFE 毛细管，内径 0.5 毫米 / 1 米
毛细管，用于IC的样品操作。



1 PCS 6.1807.010 用于内径6-9毫米连接管的Y型连接器
连接器，用于废液管




2 PCS 6.1816.020 硅酮管，6毫米内径，1米
用于废液管。



1 PCS 6.1826.360 泵管 LFL（白色/白色），三个堵头
用于样品处理器



1 PCS 6.1826.420 PharMed® 泵管（橙色/黄色）3 个止动器
用于带蠕动泵的 MSM 再生。

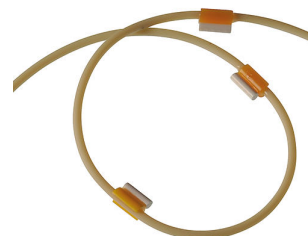

1 PCS 6.1831.050 PEEK 毛细管，内径0.5 毫米，40厘米
用于在线英蓝渗析与样品转换器。用于IC英蓝渗析单元，离子色谱样品处理系统，集成型自动样品处理系统，英蓝渗析型离子色谱样品处理系统，IC液体处理英蓝渗析单元，集成型自动样品处理系统



1 PCS 6.1831.060 PEEK 毛细管，内径0.5 毫米，1 米
用于在线渗析与样品转换器。用于IC渗析单元，IC样品处理器，紧凑型IC自动进样器，过滤型IC样品处理器，渗析型IC样品处理器，IC液体处理渗析单元



1 PCS

6.1831.100

PEEK 毛细管, 内径0.25 毫米, 1 米



1 PCS

6.2023.020

SGJ 14/15 的夹子

SGJ 14/16 的夹子



1 PCS

6.2041.510

样品架, 56 x 11 mL 和 1 x 250 mL, (聚氯乙烯)

与 919 Autosampler plus、858 Professional Sample Processor 适配的样品架, 用于 56 个样品容器和 1 个冲洗瓶。可使用以下样品容器和冲洗瓶: 100 mL 分解管 (CSB)。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



1 PCS

6.2151.000

电缆 USB A – Mini-DIN 插口 8 针

控制器电缆。



1 PCS 6.2151.020 电缆, USB A - USB B, 1.8米
USB连接电缆



1 PCS 6.2251.000 用于毛细管的标记套管
用于标记毛细管的彩色热缩套管部件。每三个一种颜色, 共五种颜色。



1 PCS 6.2617.010 用于活塞密封圈的工具
用于移除和装配所有IC泵上的活塞密封圈



2 PCS 6.2621.000 活动扳手
最大开口: 20毫米。用于IC分析仪



1 PCS 6.2621.030 六角扳手 (Hexagon key) , 4毫米



1 PCS 6.2621.050 1/4英寸扳手
用于1/4英寸的螺丝。用于IC仪器



1 PCS 6.2621.080 毛细管切管器

用于轻松切割塑料毛细管的切割工具，1/16" 和 1/8"，包括 5 把备用刀片。



1 PCS 6.2621.100 内六角扳手, 3 mm, 用于 IC Sample Processor



1 PCS

6.2621.300

万思得IC样品处理器的工具套件

工具套件，包括开口扳手和六角扳手（Hexagon key）。



2 PCS

6.2739.000

扳手

用于拧紧连接器



1 PCS

6.2743.057

样品容器 11 mL

200 件。用于 IC Sample Processors 和 VA Autosampler。

IC 样品容器材质为聚丙烯 (PP) 塑料，面向医疗保健应用。生产和包装均在无菌和洁净室条件下进行（洁净室等级 7，依照 DIN ISO 14644 标准）。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。



1 PCS

6.2743.077

塞子，其上有穿孔

200只。用于IC样品处理器



1 PCS 6.2743.080 防溢出堵头 (ProfilC) , 5只
用于专业型IC分析仪



2 PCS 6.2744.014 压力螺丝2x
带UNF 10/32连接口。用于IC仪器, 在线英蓝渗析 (PEEK毛细管连接管)



1 PCS 6.2744.020 Luer / UNF连接器
用于IC分析仪



1 PCS 6.2744.034 2 个 Olive/UNF 10/32 两通
连接压力螺丝和泵管。2 个。用于带有蠕动泵的离子色谱仪。



1 PCS

6.2744.035

1 个 Olive/UNF 10/32 两通

连接压力螺丝和泵管。1 个。用于带有蠕动泵的离子色谱仪。



3 PCS

6.2744.040

2x UNF 10/32连接器

用于连接1/16英寸的毛细管。用在IC分析仪上



3 PCS

6.2744.070

压力螺丝（短）

较短的版本。带UNF 10/32连接口。5件装。PEEK泵头的备用件。




1 PCS

6.2744.160

连接头 /UNF 10/32 连接器，带安全装置

安全连接装置，用于将泵管连接到一个螺丝连接头上。

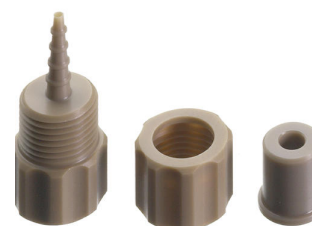

1 PCS

6.2744.180

泵管连接器，带安全锁及过滤器

用于泵管与毛细管之间的连接，带内置过滤器




1 PCS

6.2744.210

管连接器，用于吸液过滤器（ProfilC）

用于专业型IC分析仪

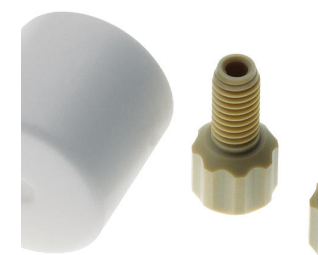

1 PCS

6.2816.020

注射器，10毫升，带Luer连接头。

用于许多种 IC 及 VA 应用



1 PCS

6.2816.040

冲洗针

带PTFE管与 Luer 连接。用于注射器。用于吸取淋洗液。



1 PCS

6.2821.090

吸液过滤头

孔径大小 27 μm 。每套 5 件。用于吸液管 (6.1834.000) 及滤管 (6.1821.040) 和 (6.1821.050)。




1 PCS

6.2821.130

用于在线过滤器的备用过滤器

用于在线过滤器的备用过滤器。

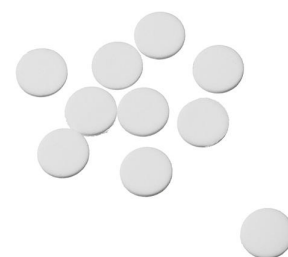

1 PCS

6.2832.000

MSM 转子 A

抑制器转子，用于所有带MSM的IC仪器。



1 PCS

6.2833.030

863集成型自动取样器使用的针固定器 1/8 吋

863集成型自动取样器使用的针固定器 1/8 吋



1 PCS

6.2835.010

连至 MSM 和 SPM Modul 的连接件

通用连接件，用于 Professional IC Vario 中的 MSM 和 Compact Flex 设备，以及 MSM-HC 和 SPM Modul。带导入和导出管。



1 PCS

6.2842.020

适配器套管，MSM

可在适配器套管的帮助下将 MSM Rotor A 和 MSM-LC Rotor A 安装在转子外壳中。



1 PCS

6.2846.010

氧化锆样品针头，带 PEEK（聚醚醚酮）抽吸尖管

用于离子色谱分析中的样品处理器和 Autosampler。PEEK（聚醚醚酮）抽吸尖管确保能穿透瓶盖。



用于控制所有智能型 Professional IC 系统、Compact IC 仪器及其外部设备，所有检测器和各种 Autosampler、800 Dosino、771 Compact Interface 的 Metrohm 专业色谱法软件。该软件可用于离子色谱分析的控制、数据采集、数据评估和监控，以及生成报告。

图形用户界面，用于常规操作、大量数据库程序、方法开发、配置和手动系统控制；灵活的用户管理、易用的数据库操作、大量数据输出功能、可个性化配置的报告生成器、控制和监控全部系统元件和色谱分析结果。

MagIC Net Professional 符合 FDA 准则 21 CFR 第 11 部分以及 GLP。

MagIC Net 提供 15 种对话框语言：德语、英语、中文、繁体中文、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、保加利亚语、捷克语、匈牙利语、日语、韩语、俄语、斯洛伐克语

该版本对图形用户界面进行了更新，还有话了 4K 监视器上用户界面的缩放和清晰度。

1 份许可证

将在一个 U 盘上提供安装文件和文献。



Optional accessories

Order no.	Description	
2.948.0010	948 Continuous IC Module, CEP	
	通过 948 Continuous IC Module 自动化生产氢氧化物淋洗液。既可生产等度淋洗液，也可以梯度形式运行。 948 Continuous IC Module, CEP 由以下组成部分构成： • 948 Continuous IC Module • Eluent Producer Cartridge (EPC, 6.02850.200) • 连续阴离子 Trap (CT, 6.02850.100) • 高压除气机 (H-DEG, 6.02850.000) 示例方法段依据 948 Continuous IC Module 手册。	
6.01032.410	Metrosep A Supp 17 - 100/4.0	
	Metrosep A Supp 17 柱是用于在环境温度下使用的离子分离柱，具有出色的性价比。Metrosep A Supp 17 - 100/4.0 可以在短时间内分离标准阴离子。通过高流速（最高 1.8 mL/min）灵活性，根据分离问题可以实现极短的分析时间。	
6.01032.420	Metrosep A Supp 17 - 150/4.0	
	分离柱 Metrosep A Supp 17 - 150/4.0 是阴离子测定的佳选择，要求在环境温度下具有高分离率和短分离时间。高 1.4 mL/min 的流速为佳测定效果提供了可能。Metrosep A-Supp-17 柱具有很好的性价比。	
6.01032.430	Metrosep A Supp 17 - 250/4.0	
	Metrosep A Supp 17 - 250/4.0 是高分离率和出色性价比的组合，不需要柱加热炉。所使用的基本材料聚苯乙烯/二乙烯基苯可以确保分离柱的长使用寿命。在该柱上可以完成复杂的分离任务。	

6.01032.500 Metrosep A Supp 17 Guard/4.0

Metrosep A Supp 17 Guard/4.0 保护柱可有效保护分析用分离柱 Metrosep A Supp 17，使其免受污染。该保护柱采用 «On Column Guard System» 技术，其特征是操作简便。只要将其拧到分析柱上即可。不需要任何工具。



6.05800.060 升级版套件：IC Eco

用于为 EcoIC 加装脉冲减荡器的升级包。



6.2842.100 MSM-HC Rotor A, 氢氧化物

适用于所有带 MSM-HC（高容量 Metrohm Suppressor Module）的离子色谱仪的氢氧化物淋洗液高容量抑制器转子。

