


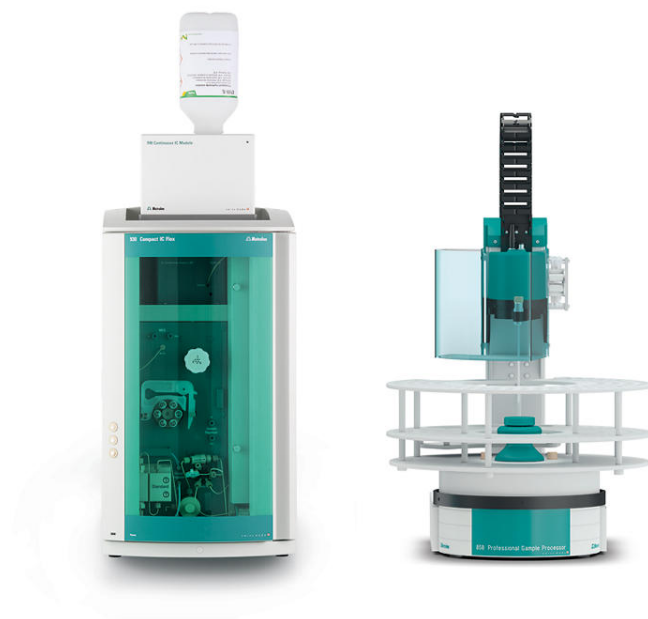

Continuous IC Package PP

2.930.8040

Continuous IC Package PP 可分析含氢氧化物淋洗液的阴离子。它包括所有需要的部件，如 930 Compact IC Flex Oven/SeS/PP/Deg、IC Conductivity Detector MB、948 Continuous IC Module、858 Professional Sample Processor：泵和 MagIC Net 软件。

Scope of delivery 2.930.8040

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.858.0020	858 Professional Sample Processor – Pump

858 Professional Sample Processor – Pump 可处理体积在 500 μ L 至 500 mL 之间的样品。进行样品转移时，既可以使用内置的双向双通道蠕动泵、也可通过 800 Dosino 来进行。



1 PCS

1.930.2560

930 Compact IC Flex Oven/SeS/PP/Deg

930 Compact IC Flex Oven/SeS/PP/Deg 是智能型 Compact 离子色谱仪器，带有柱加热炉、序列抑制和蠕动泵用于抑制器再生，以及内置的脱气装置。该仪器可使用各种分离和检测方法。

典型的应用范围：

- 阴离子或阳离子测定，序列抑制法及电导检测




1 PCS

6.02850.000

高压除气机

高压除气机可清除在生产淋洗液时产生的氢气。

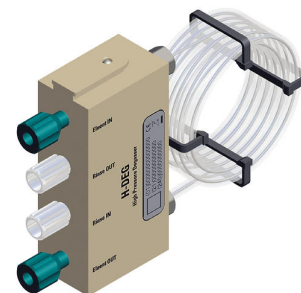

1 PCS

6.02850.100

连续阴离子 Trap

连续阴离子 Trap (CT-A) 清除淋洗液中的阴离子污染物和碳酸盐。



1 PCS

6.02850.200

淋洗液产生器套杆 A

淋洗液产生器套杆 A (EPC A) 基于水的电解由 4 mol/L 氢氧化物浓缩物生产出高纯度氢氧化物淋洗液。阴离子交换膜片可以实现阴离子向淋洗液的选择性迁移。为 EPC A 供给可与水处理设备搭配、全自动运行的超纯水。




1 PCS

6.05000.300

附件包: CEP

948 Continuous IC Module, CEP 的安装附件包

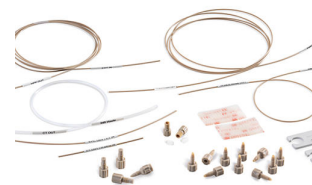

3 PCS

6.1608.080

试剂瓶 / 300毫升

IC样品处理器的冲洗瓶



1 PCS

6.1803.030

PTFE 毛细管, 内径 0.5 毫米 / 3 米

毛细管, 用于在线渗析, 用在渗析单元、渗析式IC样品处理器、IC液体处理渗析单元上



2 PCS

6.1826.360


泵管 LFL (白色/白色), 三个堵头

用于样品处理器



1 PCS 6.1826.420 PharMed® 泵管（橙色/黄色）3 个止动器

用于带蠕动泵的 MSM 再生。

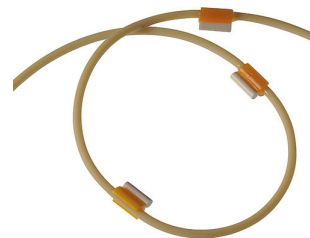

1 PCS 6.1831.060 PEEK 毛细管，内径0.5 毫米，1 米

用于在线渗析与样品转换器。用于IC渗析单元，IC样品处理器，紧凑型IC自动进样器，过滤型IC样品处理器，渗析型IC样品处理器，IC液体处理渗析单元



1 PCS 6.1831.160 PEEK（聚醚醚酮）毛细管 0.5 mm 内直径 / 70 cm



1 PCS 6.2041.760 样品架 54 x 11 mL + 1 x 300 mL

较小直径的样品盘，用于排成两排的 54 x 11 mL 样品容器及附加的 1 x 300 mL 样品瓶




1 PCS

6.2064.000

万思得IC样品处理器烧杯截留器

838万思得样品处理器样品管截留板 (retaining plate) 。可放2.5或11毫升样品管。

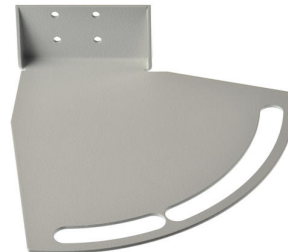

1 PCS

6.2151.000

电缆 USB A – Mini-DIN 插口 8 针

控制器电缆。



1 PCS

6.2151.020

电缆, USB A - USB B, 1.8米

USB连接电缆



1 PCS

6.2164.010

桌式电源 100 - 240 V/24 V 直流

用于 915 KF Ti-Touch、916 Ti-Touch、917 Coulometer 和 所有 Eco Titrator/Eco Dosimat 的桌式电源。



1 PCS

6.2621.300

万思得IC样品处理器的工具套件

工具套件，包括开口扳手和六角扳手（Hexagon key）。



1 PCS

6.2739.000

扳手

用于拧紧连接器



1 PCS

6.2744.010

压力螺丝5x

带UNF 10/32接口。用于IC仪器，在线英蓝渗析（连接PEEK毛细管）



1 PCS

6.2744.014

压力螺丝2x

带UNF 10/32接口。用于IC仪器，在线英蓝渗析（PEEK毛细管连接管）



2 PCS

6.2744.034

2 个 Olive/UNF 10/32 两通

连接压力螺丝和泵管。2 个。用于带有蠕动泵的离子色谱仪。



1 PCS

6.2744.070

压力螺丝（短）

较短的版本。带UNF 10/32连接口。5件装。PEEK泵头的备用件。




2 PCS

6.2744.160

连接头 /UNF 10/32 连接器，带安全装置

安全连接装置，用于将泵管连接到一个螺丝连接头上。

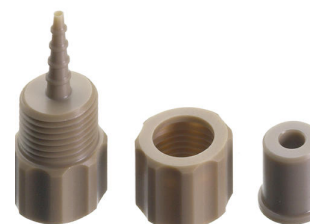

1 PCS

6.2744.180

泵管连接器，带安全锁及过滤器

用于泵管与毛细管之间的连接，带内置过滤器




1 PCS

6.2751.110

安全盖板

用于高级 IC/VA 样品处理器的安全盖板。

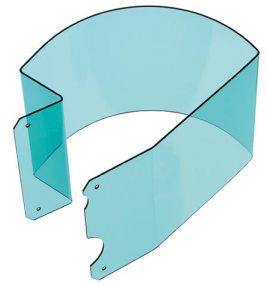

1 PCS

6.2842.100

MSM-HC Rotor A, 氢氧化物

适用于所有带 MSM-HC（高容量 Metrohm Suppressor Module）的离子色谱仪的氢氧化物淋洗液高容量抑制器转子。



1 PCS

6.2846.010

氧化锆样品针头，带 PEEK（聚醚醚酮）抽吸尖管

用于离子色谱分析中的样品处理器和 Autosampler。PEEK（聚醚醚酮）抽吸尖管确保能穿透瓶盖。



1 PCS

6.5000.000

附件包：Vario/Flex Basis

基本附件包，用于 Professional IC Vario 或 Compact IC Flex。



1 PCS

6.5000.010

附件包: Vario/Flex ONE

ONE 模块 (IC 泵, 带注射器) 的附件组件, 用于 Professional IC Vario 和 Compact IC Flex 仪器。



1 PCS

6.5000.020

附件包: Vario/Flex SeS

序列抑制法 (SeS) 的附件组件, 用于 Professional IC Vario 和 Compact IC Flex 仪器。不带抑制器马达。



1 PCS

6.6059.421

MagIC Net 4.2 Compact: 1 份许可证

用于控制智能 Compact IC 仪器、检测器和 Autosampler 或 771 Compact Interface 的 Metrohm 专业色谱法软件。该软件可用于离子色谱分析的控制、数据采集、数据评估和监控, 以及生成报告。

图形用户界面, 用于常规操作、大量数据库程序、方法开发、配置和手动系统控制; 灵活的用户管理、易用的数据库操作、大量数据输出功能、可个性化配置的报告生成器、控制和监控全部系统元件和色谱分析结果。



MagIC Net Compact 符合 FDA 准则 21 CFR 第 11 部分以及 GLP。

MagIC Net 提供 15 种对话框语言: 德语、英语、中文、繁体中文、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、保加利亚语、捷克语、匈牙利语、日语、韩语、俄语、斯洛伐克语

该版本对图形用户界面进行了更新, 还有话了 4K 监视器上用户界面的缩放和清晰度。

1 份许可证。

将在一个 U 盘上提供安装文件和文献。