



采用 PT1000（塞子 U）的 Porotrode

6.00235.600

集成有 Pt1000 温度传感器的组合 pH 电极用于 pH 测量/滴定：

含蛋白质的样品（食品、生物样品）

受到严重污染的样品

粘性样品

专门开发的毛细管隔膜和参比电解质 Porolyt（6.2318.010）可在含蛋白质的溶液中最实现最佳性能。存放在保存液中。

Scope of delivery 6.00235.600

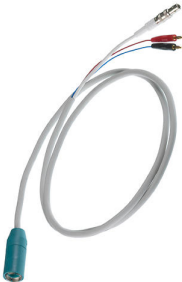
Qt.	Order no.	Description
100 Stk	6.1236.050	套管，SGJ 14/12 毫米
		套管，SGJ 14/12 毫米，聚乙烯



与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2104.600	用于插头 U/插头 F 2x2 mm B 的电极电缆，1m 用于通过万通插头 U 将电极连接在万通设备上（插座 F）。	
6.2104.610	用于插头 U/插头 F + 2x2 mm B 的电极电缆，2m 用于通过万通插头 U 将电极连接在万通设备上（插座 F）。	
6.2318.010	Porolyt 50 mL 电极 6.0235.200 Porotrode 和带 Pt1000 的 6.00235.600 Porotrode 的参比电解质 Porolyt。 替代 6.2318.000 Porolyt 50 mL。	
6.2325.100	清洗液 3 x 50 mL 只有对 pH 玻璃膜和隔膜进行预防性和定期保养，才能保证长期可靠的测量结果。用有毒化学物质进行腐蚀性清洗或对隔膜进行机械处理不仅复杂而昂贵，而且加速了 pH 玻璃电极的老化。 该清洗液是为简单和温和清洁 pH 玻璃电极而开发的。定期使用清洗液可以明显延长电极的使用寿命。 该清洗液也是 pHit kit 的内容。	