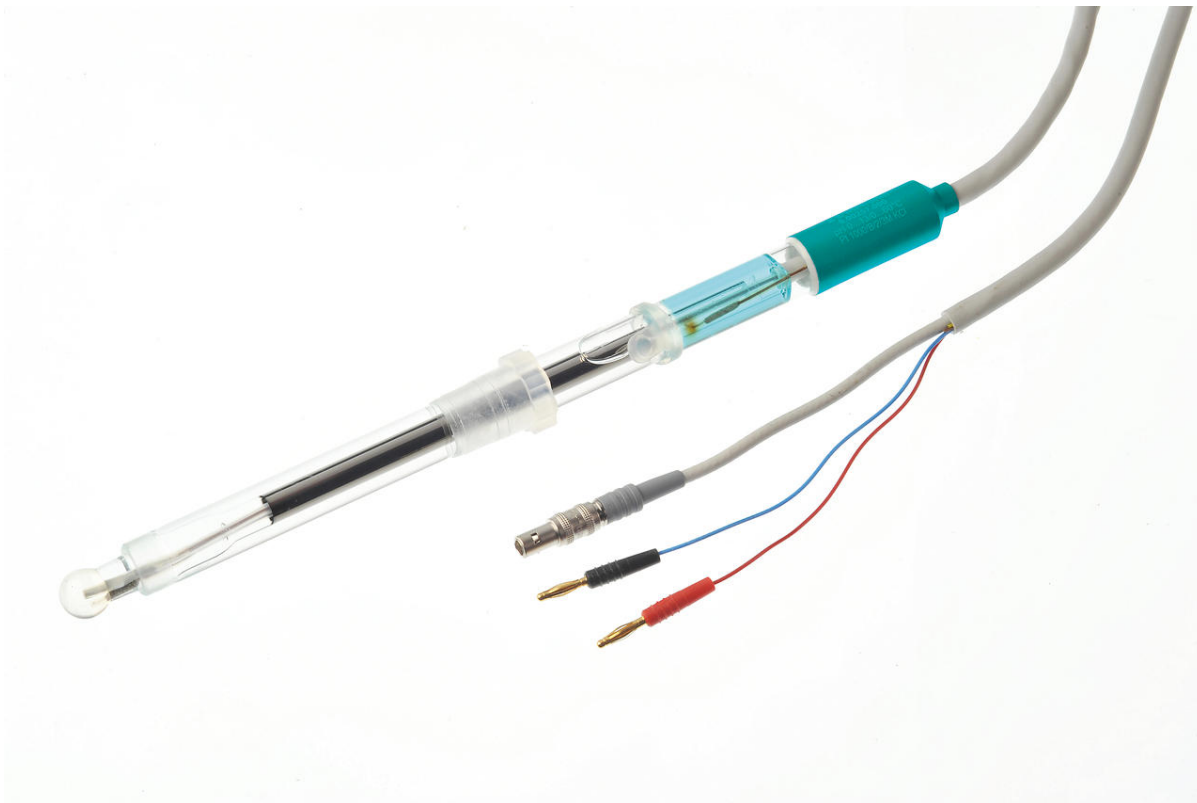




Aquatrode Plus, 带 Pt1000 (固定电缆)

6.00257.000

组合 pH 电极，集成 Pt1000 温度传感器和固定电缆（2 m，2 mm 香蕉插头），用于在离子含量低的水解介质（例如饮用水，工艺水）中 pH 测量/滴定，并且在该类试样中以特别快速的相应时间进行显示。

磨砂口接界隔膜对污染不敏感。

当使用 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol / L}$ 作为外参比液电解质时，建议在储存溶液中储存。

中间电解质可以换成不含氯离子的电解质（例如，硝酸钾 $c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol / L}$ (6.2310.010))，储存在用过的电解质中。

Scope of delivery 6.00257.000

Qt.	Order no.	Description
100 Stk	6.1236.050	套管，SGJ 14/12 毫米
		套管，SGJ 14/12 毫米，聚乙烯



与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2308.020	电解液, 3 mol/L KCl (250 mL) 电解液c (KCl) =3 mol/L, 250 mL (用于Ag/AgCl参比系统)	
6.2323.000	保存溶液 保存溶液, 可用于所有参比电解液为c(KCl) =3 mol/L KCl溶液的复合pH玻璃电极。	
6.2325.000	pHit kit pH电极的维护套件该套件包括:- 50 mL 清洗液- 50 mL 3M KCl 溶液- 50 mL 储藏液- 2 储存容器- 使用说明	
6.2310.010	电解质 KNO ₃ -1mol/L 250 mL 电解液 KNO ₃ 1 M (用于复合银电极的参比电解液)	

6.2103.150 4毫米插头 / 2毫米插座的红色适配器

适配器（香蕉形），用于将带2毫米插头的电极与带4毫米插座的仪器相连。



6.2325.100 清洗液 3 x 50 mL

只有对 pH 玻璃膜和隔膜进行预防性和定期保养，才能保证长期可靠的测量结果。用有毒化学物质进行腐蚀性清洗或对隔膜进行机械处理不仅复杂而昂贵，而且加速了pH 玻璃电极的老化。

该清洗液是为简单和温和清洁 pH 玻璃电极而开发的。定期使用清洗液可以明显延长电极的使用寿命。

该清洗液也是 pHit kit 的内容。

