



# Ag-Titrode, 带 AgBr 涂层

6.00430.100BR

带 pH 玻璃膜的组合式银环形电极，用作参比电极。

银环具有溴化物 (AgBr) 涂层，其适用于较高的灵敏度和更好的指示极限。

该免维护电极适用于 pH 值恒定的沉积滴定（硝酸银滴定剂），例如：

- 氯化物、溴化物、碘化物
- 硫化物
- 硫化氢
- 硫醇
- 氰化物

该电极存放在蒸馏水中。

Scope of delivery 6.00430.100BR

| Qt. | Order no. | Description |
|-----|-----------|-------------|
|-----|-----------|-------------|

100 Stk

6.1236.050 套管, SGJ 14/12 毫米

套管, SGJ 14/12 毫米, 聚乙烯



---

100 Stk

6.2008.040 存放容器

与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。




# Optional accessories

| Order no.  | Description                                           |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 6.2104.020 | 1米的电极电缆，F<br><br>用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。 |



---

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 6.02104.000 | 电极线缆，G 型电极插头 / P 型插头，0.55 m<br><br>将模拟电极（G 型电极插头）连接到 OMNIS 模拟测量模块上的电缆。 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|

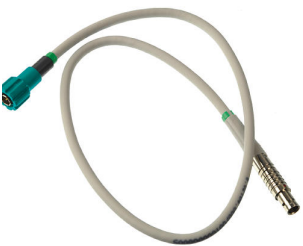

---

|             |                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 6.02104.010 | 电极线缆，G 型电极插头 / P 型插头，1.5 m<br><br>将模拟电极（G 型电极插头）连接到 OMNIS 模拟测量模块上的电缆。 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|

