



Ag Titrode, 带 Ag₂S 硫化银膜

6.00430.100S

带 pH 玻璃膜的组合式银环形电极，用作参比电极。

银环具有硫化物 (Ag₂S) 涂层，其适用于较高的灵敏度和更好的指示极限。

该免维护电极适用于 pH 值恒定的沉积滴定（硝酸银滴定剂），例如：

- 氯化物、溴化物、碘化物
- 硫化物
- 硫化氢
- 硫醇
- 氰化物

该电极存放在蒸馏水中。

Scope of delivery 6.00430.100S

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.1236.050 套管, SGJ 14/12 毫米

套管, SGJ 14/12 毫米, 聚乙烯



100 Stk

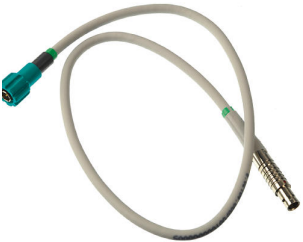
6.2008.040 存放容器

与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2104.020	1米的电极电缆，F 用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。	

6.02104.000	电极线缆，G 型电极插头 / P 型插头，0.55 m 将模拟电极（G 型电极插头）连接到 OMNIS 模拟测量模块上的电缆。	
-------------	--	---

6.02104.010	电极线缆，G 型电极插头 / P 型插头，1.5 m 将模拟电极（G 型电极插头）连接到 OMNIS 模拟测量模块上的电缆。	
-------------	---	---