



组合式 Ag 环形电极，带 Ag₂S 涂层

6.00450.100S

带磨砂口接界隔膜的复合银环形电极。

牢固融合的银环可耐受高浓度的酸和盐溶液，银环具有硫化物 (Ag₂S) 涂层，其适用于较高的灵敏度和更好的指示极限。

该电极适用于 pH 值变化的沉积滴定（硝酸银滴定剂），例如：

- 氯化物、溴化物、碘化物
- 硫化物
- 硫化氢
- 硫醇
- 氰化物

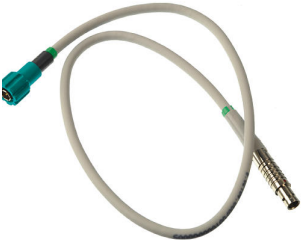
磨砂口接界隔膜对污染不敏感。

作为参考电解液并进行制备时使用了 $c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$ 。

Scope of delivery 6.00450.100S

Qt.	Order no.	Description	
100 Stk	6.1236.050	套管, SGJ 14/12 毫米 套管, SGJ 14/12 毫米, 聚乙烯	
100 Stk	6.2008.040	存放容器 与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。	

Optional accessories

Order no.	Description	
6.2104.020	1米的电极电缆，F 用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。	
6.2310.010	电解质 KNO ₃ -1mol/L 250 mL 电解液 KNO ₃ 1 M（用于复合银电极的参比电解液）	
6.02104.000	电极线缆，G 型电极插头 / P 型插头，0.55 m 将模拟电极（G 型电极插头）连接到 OMNIS 模拟测量模块上的电缆。	
6.02104.010	电极线缆，G 型电极插头 / P 型插头，1.5 m 将模拟电极（G 型电极插头）连接到 OMNIS 模拟测量模块上的电缆。	