



Metrosep Carb 2 - 250/2.0

6.01090.230

Metrosep Carb 2 - 250/2.0 离子色谱柱特别适用于使用碱性淋洗液测定碳水化合物和脉冲安培检测。该大容量阴离子交换柱基于苯乙烯/二乙烯基苯聚合物。它在 pH = 0 - 14 的范围内较稳定，可分离单糖和双糖。此外还可用于分析糖醇、脱水糖和低聚糖等。250 mm 微孔径款型的 Metrosep Carb 2 分离柱极为适用于复杂的分离要求。

因较低的淋洗液消耗，它尤其适用于 IC-MS 联用。

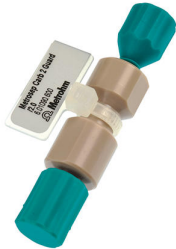
Scope of delivery 6.01090.230

Qt.	Order no.	Description
2 PCS	6.2744.060	螺纹堵头

用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。



Optional accessories

Order no.	Description
6.01090.600	Metrosep Carb 2 Guard/2.0 微孔保护柱 Metrosep Carb 2 Guard/2.0 可有效去除污染，并由此保护用来分析的分离柱。该保护柱所选的设计型式使其不会对色谱分离造成影响。 
6.01806.000	PEEK（聚醚醚酮）毛细管 0.18 mm 内直径 / 2 m 供高压流体路径中使用，例如：作为 Metrosep Carb 2 色谱柱的预热毛细管，2 mm 款型（6.01090.2x0）。 
6.1015.200	Metrosep BO3 Trap 1 - 100/4.0 Trap 柱用于清除淋洗液中的硼酸污染。Metrosep BO₃ Trap 1 - 100/4.0 主要用于使用氢氧化物淋洗液分析碳水化合物。 
6.1015.300	Metrosep CO3 Trap 1 - 100/4.0 Trap 柱用于清除氢氧化物淋洗液中的碳酸盐痕量。 