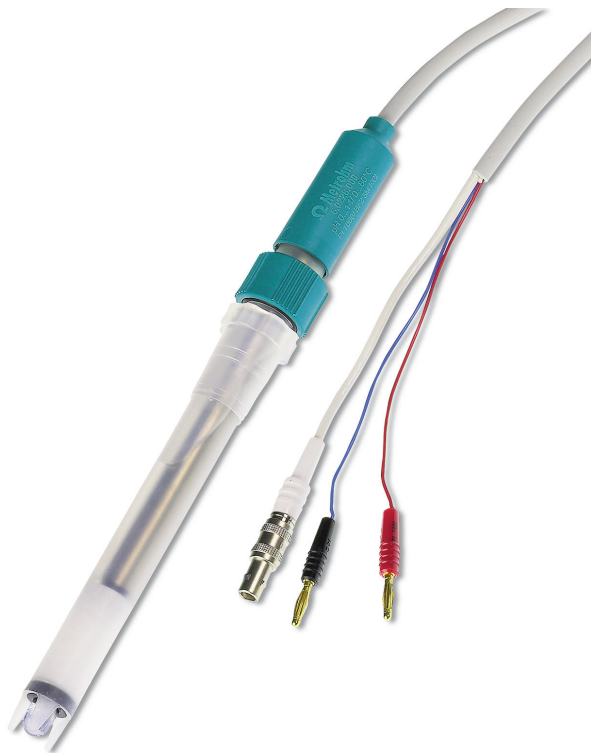




Solitrode, 带 Pt1000 (1.2 m 固定电缆)

6.0228.000

组合 pH 电极与集成的 Pt1000 温度传感器和固定电缆 (1.2 m)。该电极适用于沉淀液、蛋白质液和无硫化物溶液中的常规 pH 测量。得益于聚丙烯制成的坚固/不易破碎的塑料杆和玻璃膜防震保护, 电极可以承受较高的机械载荷。

参比电解质: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, 储存在储存溶液中。

Scope of delivery 6.0228.000

Qt.	Order no.	Description
100 Stk	6.1236.050	套管, SGJ 14/12 毫米
		套管, SGJ 14/12 毫米, 聚乙烯



与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。



Optional accessories

Order no.	Description
6.2308.020	电解液, 3 mol/L KCl (250 mL) 电解液c (KCl) =3 mol/L, 250 mL (用于Ag/AgCl参比系统)
6.2323.000	保存溶液 保存溶液, 可用于所有参比电解液为c(KCl) =3 mol/L KCl溶液的复合pH玻璃电极。
6.2325.000	pHit kit pH电极的维护套件该套件包括:- 50 mL 清洗液- 50 mL 3M KCl 溶液- 50 mL 储藏液- 2 储存容器- 使用说明
6.2325.100	清洗液 3 x 50 mL 只有对 pH 玻璃膜和隔膜进行预防性和定期保养, 才能保证长期可靠的测量结果。用有毒化学物质进行腐蚀性清洗或对隔膜进行机械处理不仅复杂而昂贵, 而且加速了pH 玻璃电极的老化。 该清洗液是为简单和温和清洁 pH 玻璃电极而开发的。定期使用清洗液可以明显延长电极的使用寿命。 该清洗液也是 pHit kit 的内容。

