



Syntrode, 带 Pt1000 (长度 36.8 cm)

6.0248.600

集成有 Pt1000 温度探针的组合式 pH 电极，安装长度为 28.8 cm。该电极特别适用于：

- 用于合成和生物反应器，例如用于 STAT 滴定
- 温度升高的时候
- 长时测量的时候

由于固定的磨口隔膜，此电极对污染不敏感，并拥有用于参比电解质的储存容器。

参比电极：c (KCl) = 3 mol / L，储存在储存溶剂中。

替代方法：T>80° C 时的测量用参比电解质，储存在 Idrolyt 中。

Scope of delivery 6.0248.600

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.1236.050 套管, SGJ 14/12 毫米

套管, SGJ 14/12 毫米, 聚乙烯



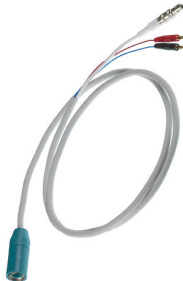
100 Stk

6.2008.040 存放容器

与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2325.000	pHit kit pH电极的维护套件该套件包括:- 50 mL 清洗液- 50 mL 3M KCl 溶液- 50 mL 储藏液- 2 储存容器- 使用说明	
6.2308.020	电解液, 3 mol/L KCl (250 mL) 电解液c (KCl) =3 mol/L, 250 mL (用于Ag/AgCl参比系统)	
6.2308.040	Idrolyte (250毫升) Idrolyte (为 6.0224.100 电极和复合电极 T >80° C)	
6.2104.600	用于插头 U/插头 F 2x2 mm B 的电极电缆, 1m 用于通过万通插头 U 将电极连接在万通设备上 (插座 F) 。	

- 6.2104.610 用于插头 U/插头 F + 2x2 mm B 的电极电缆，2m
用于通过万通插头 U 将电极连接在万通设备上（插座 F）。



- 6.2103.150 4毫米插头 / 2毫米插座的红色适配器
适配器（香蕉形），用于将带2毫米插头的电极与带4毫米插座的仪器相连。



- 6.2323.000 保存溶液
保存溶液，可用于所有参比电解液为 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ KCl溶液的复合pH玻璃电极。



- 6.2325.100 清洗液 3 x 50 mL

只有对 pH 玻璃膜和隔膜进行预防性和定期保养，才能保证长期可靠的测量结果。用有毒化学物质进行腐蚀性清洗或对隔膜进行机械处理不仅复杂而昂贵，而且加速了pH 玻璃电极的老化。

该清洗液是为简单和温和清洁 pH 玻璃电极而开发的。定期使用清洗液可以明显延长电极的使用寿命。

该清洗液也是 pHit kit 的内容。

