



升级 OMNIS Sample Robot S-L WSM

6.05800.610

该套件包含将当前现有的 S 尺寸 OMNIS Sample Robot WSM 升级为 L 尺寸所需的所有组件。除所需的样品盘和模块下层结构以外，还包括所有所需的电缆、螺栓、转臂延长件以及功能许可证。此外套件还包含 OMNIS Sample Robot M/L 的排放槽。

Scope of delivery 6.05800.610

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.01804.460	排放槽，用于 OMNIS Sample Robot M/L WSM

排放槽安放在 OMNIS Sample Robot WSM M/L 工作站后面，并在故障情况下将溢流的溶液收集起来，以便通过一根软管安全且无接触地将其通入一个废料罐中。




Optional accessories

Order no.	Description	
2.1024.0010	OMNIS Workstation Module (1T/0P)	
	用于安装到 OMNIS Sample Robot WSM 中的模块。该模块包含 1 个用于自动处理样品容器的工作站，不需要使用泵。该工作站可置放分析用的样品杯。两次分析之间会将所使用的传感器在工作站的存储杯中进行清洁或置放。如果分析时需要搅拌，则必须为该工作站加装独立的棒式搅拌器或磁力搅拌器。	
2.1024.0020	OMNIS Workstation Module (1T/2P)	
	用于安装到 OMNIS Sample Robot WSM 中的模块。该模块包含一个用于自动处理样品容器的工作站和两台用于自动清洁（冲洗和抽吸）样品容器和传感器的泵。该工作站可置放分析用的样品杯。两次分析之间会将所使用的传感器在工作站的存储杯中进行清洁或置放。如果分析时需要搅拌，则必须为该工作站安装独立的棒式搅拌器或磁力搅拌器。	
2.1024.0030	OMNIS Workstation Module (2T/4P)	
	用于安装到 OMNIS Sample Robot WSM 中的模块。该模块包含两个用于自动处理样品容器的工作站和四台用于在两个工作站上自动清洁（冲洗和抽吸）样品容器和传感器的泵。工作站可置放分析用的样品杯。两次分析之间会将所使用的传感器在工作站的存储杯中进行清洁或置放。如果分析时需要搅拌，则必须为每个工作站安装独立的棒式搅拌器或磁力搅拌器。	
6.02041.010	OMNIS 样品架 9 x 250 mL, PP 聚丙烯	
	OMNIS 样品架，用于 OMNIS Sample Robot Pick&Place，适配 9 个样品杯。以下样品杯均可使用：6.01400.000、6.01400.003、6.01400.100。 塑料：聚丙烯 (PP)	

6.02041.020 OMNIS 样品架 9 x 200 mL, PP 聚丙烯

OMNIS 样品架, 用于 OMNIS Sample Robot Pick&Place, 适配 9 个样品杯。以下样品杯均可使用: 6.1459.310。


塑料: 聚丙烯 (PP)

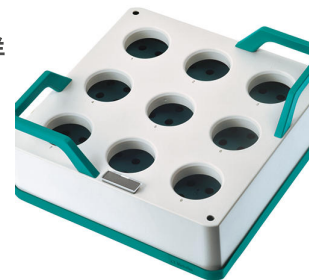

6.02041.030 OMNIS 样品架 16 x 120 mL, PP 聚丙烯

OMNIS 样品架, 用于 OMNIS Sample Robot Pick&Place, 适配 16 个样品杯。以下样品杯均可使用: 6.01400.200、6.01400.300、6.01400.303。


塑料: 聚丙烯 (PP)

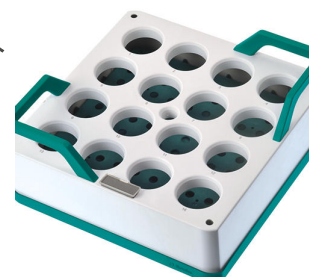

6.02041.040 OMNIS 样品架 25 x 75 mL, PP 聚丙烯

OMNIS 样品架, 用于 OMNIS Sample Robot Pick&Place, 适配 25 个样品杯。以下样品杯均可使用: 6.01402.000、6.01402.003、6.1459.400。

塑料: 聚丙烯 (PP)

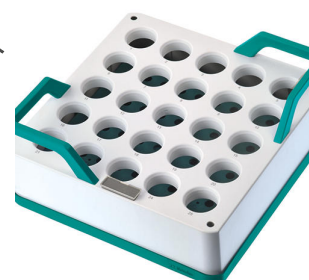

6.02041.050 OMNIS 样品架 9 x 150 mL, PP 聚丙烯

OMNIS 样品架, 用于 OMNIS Sample Robot Pick&Place, 适配 9 个样品杯。以下样品杯均可使用: 150 mL 大口杯 (高形状, 无杯口)。

塑料: 聚丙烯 (PP)

