



Metrosep A Supp 7 - 150/4.0

6.1006.620

Metrosep A Supp 7 - 150/4.0 是 A-Supp-7 柱中较短的一个。由此可在分离效率损失较小的情况下完成与 250 mm 仪器型号类似的复杂分离任务。所以可用此分离柱极佳地将亚氯酸盐和溴酸盐从标准阴离子中分离出来。借助 Metrosep A Supp 7 - 150/4.0 甚至在低 $\mu\text{g/L}$ 范围内也可准确可靠地测定这些离子。使用 5 μm 的聚乙烯醇聚合物使其达到高度指示灵敏度，其基数极高，由此实现优秀的分离性能和指示灵敏度。此外，还可通过更改温度来针对特殊应用要求调整分离工作。

Optional accessories

Order no.	Description
-----------	-------------

6.1006.500 Metrosep A Supp 5 Guard/4.0

Metrosep A Supp 5 Guard/4.0 对 IC 阴离子柱 Metrosep A Supp 5 和 7 进行可靠保护，使其不受样品或淋洗液的污染。

它含有与 Metrosep A Supp 5 相同的分离材料，也同样由 PEEK（聚醚醚酮）制成，并直接以几乎无死点容积的方式拧到相应分离柱上（«On Column Guard System»）。保护柱将延长分析用柱的使用寿命，且不会影响其色谱分离效率。建议使用 A Supp 5 Guard/4.0，其价格优惠且操作简单。



6.1006.540 Metrosep A Supp 5 S-Guard/4.0

Metrosep A Supp 5 S-Guard/4.0 对离子色谱阴离子柱 Metrosep A Supp 5 和 7 进行可靠保护，使其不受样品或淋洗液的污染。




6.1011.030 Metrosep RP 2 Guard/3.5

Metrosep RP 2 Guard/3.5 是一款多功能保护柱，能够可靠地保护分析用分离柱不受污染。可以安全清除小颗粒、氧化铁痕量或细菌。Metrosep RP 2 Guard/3.5 有助于节省费用，因其仅需简单几步操作即可更换过滤片。



6.1011.130 RP 2 保护装置替换滤芯，10片

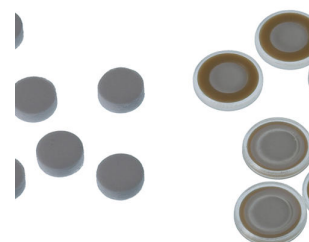

6.1031.500 Metrosep A Supp 16 Guard/4.0

Metrosep A Supp 16 Guard/4.0 保护柱可有效保护分析用分离柱 Metrosep A Supp 16, 使其免受污染。该保护柱采用 «On Column Guard System» 技术, 其特征是操作简便。只要将其拧到分析柱上即可。不需要任何工具。



6.1031.510 Metrosep A Supp 16 S-Guard/4.0

Metrosep A Supp 16 S-Guard/4.0 保护柱可有效保护分析用分离柱 Metrosep A Supp 16, 使其免受污染。保护柱简便地借助毛细管连接与分离柱连接在一起。不需要任何工具。

