



Metrosep A Supp 7 - 250/4.0

6.1006.630

水处理中的副产物（消毒副产物）不仅可能危害健康，甚至可能致癌。因此羰基卤化物成为许多检测方法及标准的目标（例如 EPA 300.1 方法 B 部分、EPA 方法 317.0、EPA 方法 326.0）。首先针对那些饮用水臭氧化过程中由溴化物中产生的溴酸盐。Metrosep A Supp 7 - 250/4.0 是可以同时测定标准阴离子、羰基卤化物和二氯乙酸的高效分离柱。借助此柱甚至在低 $\mu\text{g/L}$ 范围内也可准确可靠地测定这些离子。使用 $5\text{ }\mu\text{m}$ 的聚乙烯醇聚合物使其达到高度指示灵敏度，其分离度高，由此实现优秀的分离性能和指示灵敏度。此外，还可通过更改温度来针对特殊应用要求调整分离工作。

Optional accessories

Order no.	Description
-----------	-------------

6.1006.500 Metrosep A Supp 5 Guard/4.0

Metrosep A Supp 5 Guard/4.0 对 IC 阴离子柱 Metrosep A Supp 5 和 7 进行可靠保护，使其不受样品或淋洗液的污染。

它含有与 Metrosep A Supp 5 相同的分离材料，也同样由 PEEK（聚醚醚酮）制成，并直接以几乎无死点容积的方式拧到相应分离柱上（«On Column Guard System»）。保护柱将延长分析用柱的使用寿命，且不会影响其色谱分离效率。建议使用 A Supp 5 Guard/4.0，其价格优惠且操作简单。



6.1006.540 Metrosep A Supp 5 S-Guard/4.0

Metrosep A Supp 5 S-Guard/4.0 对离子色谱阴离子柱 Metrosep A Supp 5 和 7 进行可靠保护，使其不受样品或淋洗液的污染。



6.1011.030 Metrosep RP 2 Guard/3.5


Metrosep RP 2 Guard/3.5 是一款多功能保护柱，能够可靠地保护分析用分离柱不受污染。可以安全清除小颗粒、氧化铁痕量或细菌。Metrosep RP 2 Guard/3.5 有助于节省费用，因其仅需简单几步操作即可更换过滤片。



6.1011.120 用于 RP Guard 的备用过滤器，10 个

不用于 6.1011.030。



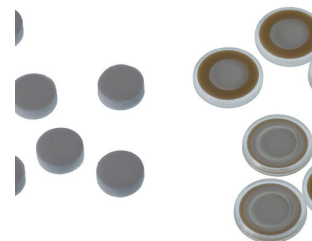

6.1031.500 Metrosep A Supp 16 Guard/4.0

Metrosep A Supp 16 Guard/4.0 保护柱可有效保护分析用分离柱 Metrosep A Supp 16，使其免受污染。该保护柱采用 «On Column Guard System» 技术，其特征是操作简便。只要将其拧到分析柱上即可。不需要任何工具。



6.1031.510 Metrosep A Supp 16 S-Guard/4.0

Metrosep A Supp 16 S-Guard/4.0 保护柱可有效保护分析用分离柱 Metrosep A Supp 16，使其免受污染。保护柱简便地借助毛细管连接与分离柱连接在一起。不需要任何工具。

