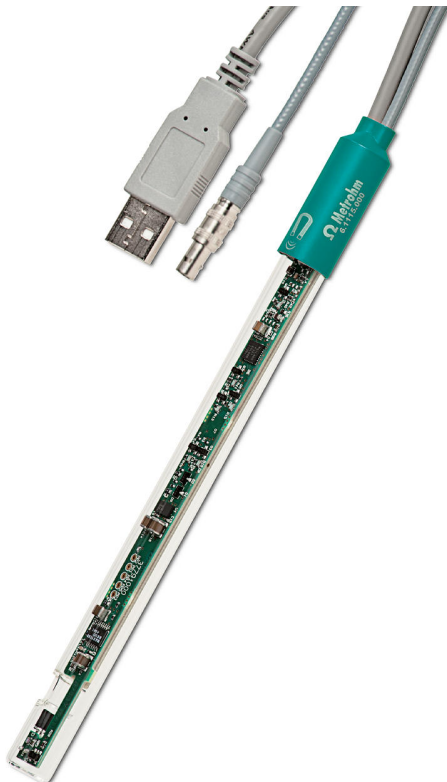




Optrode

6.1115.000

有 8 种可用波长的光度滴定用光学传感器。可以通过软件控制（tiamo 2.5 及以上版本）或通过磁铁来进行波长切换。该玻璃鞘对溶剂耐受，并且易于清洁。这种节省空间的传感器适用于，例如：

- 按照 USP 或 EP 的非水溶性滴定
- 羧基端基的测定
- TAN/TBN 根据 ASTM D974
- 硫酸测定
- 混凝土中的 Fe、Al、Ca
- 水硬度
- 根据 USP 的硫酸软骨素

传感器不适合通过测量颜色强度（比色法）来测定浓度。

Optional accessories

Order no.	Description
-----------	-------------

6.02109.000 OMNIS 适配器电缆

插头 P 上的适配器电缆插座 F 适用于将一个不带含固定电缆的温度探针的传感器（例如：光度电极或Solvotrode easyClean）连接到 OMNIS 的模拟测量模块上。



6.02117.000 5 V / 2.1 A USB 供电单元

用于 946 Portable VA Analyzer 的 USB 充电器。

在万通仪器上没有相应 USB 接口的情况下（例如在旧型仪器上），可使用该供电单元来为 6.1115.100 Optrode 供电。

