



离子色谱梯度装备：Dose-in Gradient 阴离子分析

6.5330.150

用于安装 Dose-in Gradient 阴离子分析装备的附件组。

Scope of delivery 6.5330.150

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.1014.000	Metrosep A Trap 1 - 100/4.0

高容量的阴离子柱，用于清洗淋洗液流。即便是高质量级别的试剂，例如 «Ultrapur» 或 «puriss» 仍可能有极少阴离子杂质。Metrosep A Trap 1 - 100/4.0 能确保拦住这些杂质。

此柱主要用于梯度应用中。



1 PCS 6.1602.160 淋洗液和试剂用瓶盖 GL 45

用于淋洗液瓶、试剂瓶和冲洗瓶，带有可用于吸附管及吸液管的接口。




1 PCS 6.1608.070 淋洗液瓶 / 2升 / GL 45



1 PCS 6.1618.020 S 40螺纹口连接到GL45接口的螺纹转接器

将带S40螺纹的试剂瓶（Merck等厂家生产）连接到GL45接口的转接器

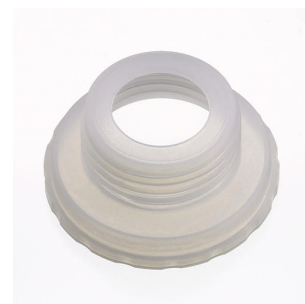

1 PCS 6.1624.000 SGJ 14转接器，用于6.1619.XXX 吸收剂

转接器，SGJ 14.6.1619.010的零件，用在稀释型样品处理系统上



1 PCS

6.1805.120

FEP管 / M6 / 100厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS

6.1829.020

FEP吸液管, M6, ×0.5米

用于加液单元



1 PCS

6.1831.030

PEEK 毛细管, 内径0.75 毫米 / 3 米

用于所有IC 元件。



1 PCS

6.1831.120

PEEK 毛细管, 内径 0.25 毫米, 45 厘米




1 PCS 6.1834.090 脱气泵的连接管，12.5厘米
用于专业型IC分析仪



1 PCS 6.2053.030 适配 6.2744.340 的紧固带，25 x 50 mm
适配 IC 离子色谱渗析装备的紧固带，Dosino 梯度



1 PCS 6.2057.210 Holder for Dosino to IC instruments
Halter zur Befestigung von Dosinos am Gehäuse von IC Geräten.

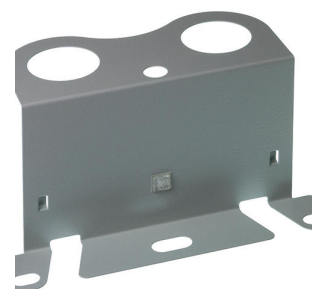

1 PCS 6.2744.070 压力螺丝（短）
较短的版本。带UNF 10/32连接口。5件装。PEEK泵头的备用件。



1 PCS

6.2744.080

螺纹 M6 / UNF 10/32 适配器

带 M6 外螺纹。用于离子色谱仪器。



1 PCS

6.2744.340

6 端口适配器, 4 × UNF 10/32, 2 × UNF 1/4-28

最多可将装有不同溶液的五台 Dosino 连接到一台离子色谱泵上。用于 Dosino 梯度应用。



1 PCS

6.2744.350

PEEK (聚醚醚酮) 压力螺丝 14 mm, 3 个

带有 UNF 10/32 接口。用于连接吸收剂模块中的 PEEK (聚醚醚酮) 毛细管。

