



VA 电极装备，配备 scTRACE Gold，用于 VA Computrace

6.5340.000

用于使用 scTRACE Gold 测定砷或汞含量的整套附件组件。包括电极座、scTRACE Gold（4 件）、量杯、搅拌器和其他附件。

Scope of delivery 6.5340.000

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.1204.200	VA Stand 工作站的搅拌器
		VA Stand 工作站的搅拌器，全套，非金属



1 PCS

6.1241.080

电极杆，用于 scTRACE Gold

scTRACE Gold 的支架，带有插接接口，用于连接工作、参考和辅助电极的电极线缆。电极杆与 scTRACE Gold 6.1258.000 构成整套传感器，用于在 Professional VA 仪器中进行伏安测量。在 VA 基架和 VA Computrace 中使用时需要三个适配器 6.2112.130。scTRACE Gold 仅须插到电极杆上即可。scTRACE Gold 应定期更换，但此期间电极杆可继续使用。




1 PCS

6.1244.020

驱动皮带

用于VA Stand 工作站上的旋转圆盘电极与搅拌器（3片）。

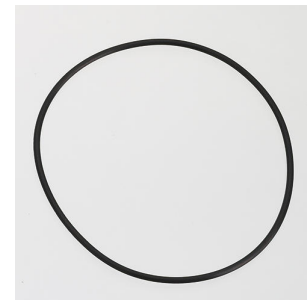

1 PCS

6.1258.000

scTRACE Gold（一组为 4 件）

基于厚膜的黄金微丝电极，用于测定水样中的砷。scTRACE Gold 是一个组合式伏安传感器，用于伏安测量。黄金微丝工作电极、Ag/AgCl 参比电极和碳辅助电极位于传感器上。易于使用，几乎免维护，可使用 scTRACE Gold 测定例如水中砷的痕量水平。与电极杆 6.1241.080 一起，可用于任何一台万通伏安测量台中。



1 PCS

6.1415.150

滴定杯 / 5至70毫升



1 PCS 6.1446.000 SGJ 塞子 / B-14/ (15)



1 PCS 6.1808.000 连接套筒, M6



3 PCS 6.2112.130 插塞接头适配器 5.5 mm / 螺旋接头, 镀金
用于 VA 电极



1 PCS 6.2753.210 罩盖

用于油分离器 62753200 以及 scTRACE Gold 的应用。

