



AUT302N.MBA.S


AUT302N.MBA.S

PGSTAT302N MBA (Multi BA) 是 PGSTAT302N 的特殊款型，可配备多达 6 个工作电极。除了主要工作电极，还可在仪器中选配的 FRA32M 模块旁安装 5 个附加的双恒电位仪模块（BA 模块）。

Scope of delivery AUT302N.MBA.S

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	AUT.DUMCELL.S	Autolab 模拟电解池

用于测试仪器的模拟电解池。

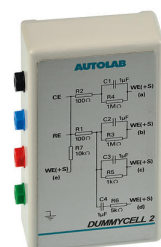

1 PCS

CABLE.PWR

电源线

用于 Autolab 仪器和附件的标准电源线。



1 PCS

CBL.USB

标准 USB 电缆


标准 USB 电缆，用于 Autolab 仪器。



1 PCS

CELLCBL.30.WE. 池电缆
S


标准池电缆，1.5 m，可连接相对电极（CE）、工作电极（WE）以及接地连接。

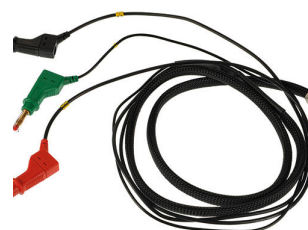

1 PCS

CELLCBL.30.RE.S 池电缆

标准池电缆，1.5 m，可连接参比电极 (RE) 和测量电极 (S)。

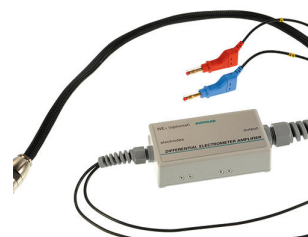



1 PCS

CABLE.BNC.50 50 cm BNC 电缆

50 cm BNC 电缆，用于诊断目的



Optional accessories

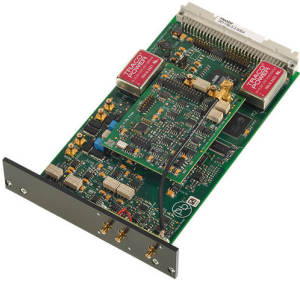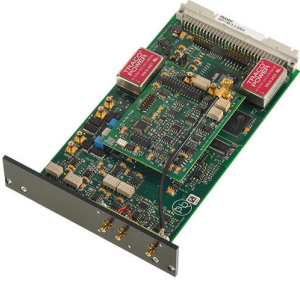Order no.	Description
MBA.S	双模双恒电位仪模块 MBA.S 是一个附加的双恒电位仪模块，其能够安装在 MultiBA (MBA) Autolab 恒电位仪/电流仪中，为 MBA 仪器增加额外的工作电极。在一台 MBA 仪器中可以安装不超过 5 个 MBA.S 模块和一个 FRA32M.S 模块。 
CABLE. MONITOR	监视器电缆，用于 N 系列 Autolab 仪器 监视器电缆，用于模块化 Autolab 系统，可连接外部设备（电位输出 (E_{out})、电流输出 (i_{out}) 和电势输入 (E_{in})）。 
FRA32M.S	电化学阻抗谱模块 FRA32M 提供了用于测量阻抗的工具，与 Autolab 联用可测量电化学阻抗。该模块允许在 10 μHz 至 32 MHz 的较宽频率范围中同时进行恒电位和恒电流阻抗测量（与 Autolab PGSTAT 联用极限为 1 MHz）。除了传统的 EIS 电化学阻抗谱之外，NOVA 软件还允许用户调节其它外部信号，诸如旋转圆盘电极的转速或光源频率，以测量电-流体或光调制阻抗谱。 FRA32M 模块带有功能强大的匹配和仿真软件，可分析阻抗数据。 

Autolab 软件开发工具包（Autolab SDK）目的旨在从诸如 LabVIEW、Visual Basic for Applications（VBA）、脚本等不同外部应用程序来控制 Autolab 仪器。通过 Autolab SDK，外部应用程序可用于测量完整流程或控制个性化 Autolab 模块。

为能在其它应用程序中使用 Autolab SDK，这些应用程序必须可使用 .NET 组件或若为‘旧版’应用程序则须可使用 COM 组件。应用程序手册中将说明如何整合这些组件。

Autolab SDK 与 Autolab NOVA 兼容，但并不要求必须安装 NOVA。

Metro
Autolab