



# TacticID-1064 ST

BWT-840001134

TacticID®-1064 ST 是一款 1064 nm 手持式拉曼分析仪，用于快速现场识别炸药、毒品和其他可疑材料。TacticID-1064 ST 的透视功能可以穿过不透明和透明的包装对样品进行非破坏性分析，同时可显著显示样品威胁级别，以便急救人员、安全人员、执法部门、炸弹小组、海关和边境保护局以及危险物品处理小组迅速采取行动，并保持样品接触小。

TacticID-1064 ST 利用成熟的拉曼光谱技术，结合获得专利的 STRaman® 技术，使用户能够实时地对未知化学品、毒品、药物、炸药和许多其他物质进行实时可行的识别（甚至可穿过不透明的障碍），从而大大降低了操作不确定性和响应时间。

TacticID-1064 ST 带有1064 nm 激光激发和 ST 适配器，用于透视应用，可扫描较大的样品区域，产生无荧光光谱，且无样品燃烧，从而使用户能够直接穿过包装识别深色和有色材料、坚硬的街头样品、不均匀的混合物和材料。

此防护等级为 IP68 的系统配有带触摸屏和/或硬件按键界面的高亮度显示屏，使用方便，甚至可穿过防护装备。

## Scope of delivery BWT-840001134

| Qt. | Order no. | Description |
|-----|-----------|-------------|
|-----|-----------|-------------|

1 PCS

BWT- 液体用小管，直径为 15 mm  
840000295

一包有 6个 硼硅酸盐玻璃材质的小管（直径 15 mm），包括袋子。



1 PCS

BWT- 小管支架的适配器  
840000344

小管支架的适配器，与直径为 15 mm 的小管兼容。



1 PCS

BWT- 手持式拉曼仪瓶适配器  
840000345

手持式拉曼仪附件：瓶适配器

NR2-BSA



1 PCS

BWT- 聚苯乙烯验证盖  
840000348

聚苯乙烯验证盖，内置符合 ASTM 标准的聚苯乙烯。




1 PCS

BWT-  
840000353

柄的保护盖

拉曼手持式仪器柄的保护盖，一包 10 个。

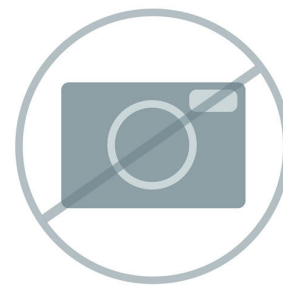

1 PCS

BWT-  
840000329

15-mm-小管用袋子

15-mm-小管用袋子。



1 PCS

BWT-  
840000419

TacticID 的输入笔/圆珠笔

触摸屏用输入笔/圆珠笔的组合（一包 5 个）。

TID-STY



1 PCS

BWT-  
840000858

USB 电缆

USB 电缆，支持微型 USB 端口，最高可支持 A 型 USB 2.0。



1 PCS

BWT-  
840000948

USB-OTG-主机电缆

USB-OTG-主机电缆，用于在一个 U 盘和一个手持式系统之间进行数据传输。



1 PCS

BWT-  
840000949

大光斑适配器

大光斑采样适配器专为瑞士万通手持式 Raman 系统而设计，可提供较大的光斑尺寸和较大的采样深度，以最大程度地降低样品燃烧的风险，特别是对于敏感或深色的样品。此外，在与透视软件兼容的设备一起使用时，该适配器支持透视功能。

TID-STA



## Optional accessories

| Order no.     | Description                                                                  |                                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| BWT-840000294 | 电池充电站<br><br>锂离子电池充电站（仅用于对 NR-电池 和 TID-电池充电）。                                |    |
| BWT-840000361 | 激光功率的手持式测量仪器<br><br>激光功率测量仪器，杆式设计，经校准。范围：5 微瓦至 1 瓦特。用于 OQ/PQ 和激光功率测量仪器的年度认证。 |    |
| BWT-840000428 | WLAN-路由器<br><br>便携式，电池供电的 WLAN 路由器，3G/4G 连接。                                 |  |

BWT-  
840000969

#### 手持式拉曼仪 1064 浸入式探针

手持式拉曼光谱仪 1064 附件：接触浸入式探针，6" 长度，工作距离约 1 mm，室温下工作压力不超过 2 巴。

NRX-CTP-IMP



BWT-  
840000970

#### 手持式拉曼仪大瓶适配器 (1064)

手持式拉曼光谱仪 1064 附件：工作距离为 10 毫米的大瓶适配器。

NRX-BSA



BWT-  
840000498

#### 一次性电池的盒子

TacticID 电池盒，搭配六节 123A 型一次性电池使用（例如：Surefire）。无电池



BWT-  
840001154

#### HH Raman 系列的肩包

TacticID 系列的肩包。采用 1000d 重型织物制成，有多个战术袋和隔间，其设计坚固耐用且耐磨。兼容所有 TacticID 产品和 NanoRam 产品。仅用于运输目的。

TID-SBG



BWT-  
840000414

## 18-V-电网适配器

电网适配器，用于 18 VDC、1.67 A。USA、EU、UK 和 AU 用插头包含在标准配置中。

TID-PWA

