




拉曼探针 638

DRP-RAMANPROBE638

反射探针设计用于单激发 638 nm 波长（高达 300 mW）。适合适用于与丝网印刷电极 DropSens 拉曼流通池（货号 RAMANCELL），传统电极的拉曼流通池（货号 RAMANCELL-C）或任何传统拉曼装置一起工作。

Optional accessories

Order no.	Description
DRP-RAMANCELL-C	用于传统电极的拉曼光谱电化学池
	拉曼光谱电化学测量 PEEK 的测量池，其设计用于参比 RAMANPROBE 和传统瑞士万通电极。

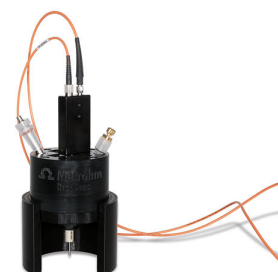

DRP-
SPELECRAMAN638

光谱电化学拉曼仪（638 nm 激光器）

SPELECRAMAN638 是一种可进行光谱电化学拉曼测量的仪器。SPELECRAMAN638 将一个 3B 级激光器 (638 nm $\pm$ 0.5)、一个双恒电位仪/恒电流仪和一个光谱仪（波长范围：640 - 885 nm，拉曼位移：50 - 4370 cm^{-1} ）结合在一个箱子中，并配有专用的光谱电化学软件，可同步进行光学和电化学实验。



DRP-RAMANCELL 丝网印刷电极拉曼流通池

黑色聚四氟乙烯反射池，用于丝网印刷电极结合参考 RAMANPROBE 进行拉曼光谱电化学测量。

