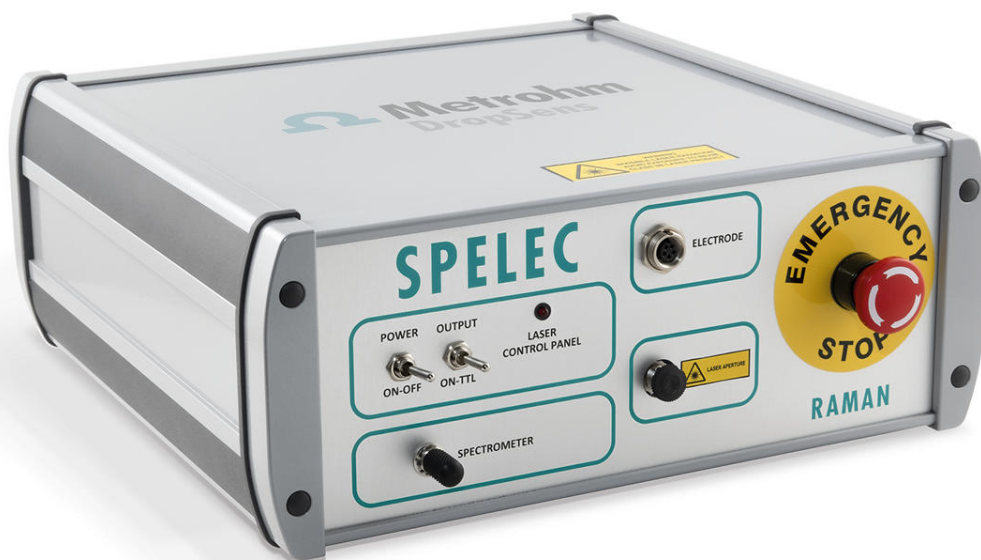




光谱电化学拉曼仪（532 nm 激光器）

DRP-SPELECRAMAN532

SPELECRAMAN532 是一种可进行光谱电化学拉曼测量的仪器。SPELECRAMAN532 将一个 3B 级激光器 (532 nm $\pm$ 0.5)、一个双恒电位仪/恒电流仪和一个光谱仪（波长范围：534 - 700 nm, 拉曼位移：75 - 4520 cm⁻¹）结合在一个箱子中，并配有专用的光谱电化学软件，可同步进行光学和电化学实验。

Scope of delivery DRP-SPELECRAMAN532

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	DropView SPELEC	DropView SPELEC 软件

DropView SPELEC 是一套光谱电化学软件及先进的数据处理软件，可控制 SPELEC 光谱仪，能够同步光学和电化学测量数据。



1 PCS

DRP- 拉曼探针
RAMANPROBE

反射探针设计用于单激发 785 nm 波长（高达 500 mW）。适用于与丝网印刷电极 DropSens 拉曼流通池或任何传统拉曼装置一起工作。



1 PCS

DRP-CABSTAT1 常规电极 μ Stat 8000(P)/4000(P)单节点电缆连接器

可将 μ Stat 8000(P)/4000(P)单节点连接至常规电极



Optional accessories

Order no.	Description
-----------	-------------

DRP-
RAMANCELL

丝网印刷电极拉曼流通池

黑色聚四氟乙烯反射池，用于丝网印刷电极结合参考 RAMANPROBE 进行拉曼光谱电化学测量。



DRP-
RAMANCELL-C

用于传统电极的拉曼光谱电化学池

拉曼光谱电化学测量 PEEK 的测量池，其设计用于参比 RAMANPROBE 和传统瑞士万通电极。

