



797 VA Computrace 用于使用自动标准加入法进行痕量分析

MVA-02

MVA-02 是一套易于使用的半自动化分析系统，可用于伏安测量的痕量分析及教学培训。可在无自动进样器的情况下方便地测定单个样品中的重金属。该系统由 797 VA Computrace 组成，配备两台 800 Dosino，用于自动添加标准溶液和基本电解质。

该系统备有大量配件用于构建整套测量工作台，包括 VA Computrace 软件和电极：多模式电极 pro (MME pro)、Ag/AgCl 参比电极和铂辅助电极。

Scope of delivery MVA-02

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

2 PCS 2.800.0010 800 Dosino多思 驱动头

800 Dosino 驱动头，带有可用于智能型加液单元的读/写硬件设备。带固定电缆。



1 PCS 6.1608.050 卡氏炉干燥瓶 / 100毫升 / GL 45



1 PCS 6.1608.090 试剂瓶 / 250毫升 / GL 45



2 PCS 6.1618.060 螺纹转接头 / GL 45 转 GL 45

螺纹转接头（GL 45 转 GL 45）；主要用于带有升高法兰的试剂瓶



1 PCS

6.1805.020

FEP管 / M6 / 52厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS

6.1805.120

FEP管 / M6 / 100厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS

6.1819.010

聚四氟乙烯管

作为 VA Stand 的洗气瓶的气体入口



1 PCS

6.2055.100

试剂瓶固定器，双瓶

试剂瓶固定器，用于2只1升的试剂瓶。用于6.5617.000吸液设备



1 PCS

6.3032.120

807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 2 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



1 PCS

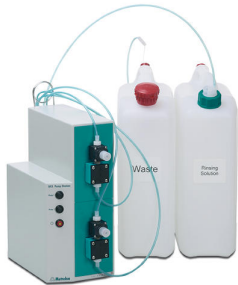
6.3032.150

807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 5 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



Optional accessories

Order no.	Description	
2.843.0040	843 VA Membrane Pump Station, 用于紧凑型 VA 系统	
	843 隔膜泵站有两个内置的隔膜泵，可直接由 797 伏安极谱仪借助远程控制信号来控制这两个泵。可自动冲洗并在 VA 和 CVS 系统中通过 797 VA Computrace 半自动及全自动清空量杯。	
	用于伏安测量的仪器型号中包含了自动冲洗和清空量杯的完整配件。	
2.846.0010	846 Dosing Interface	
	带 USB 功能的控制单元，用于连接多至四台 800 Dosino 或 805 Dosimat 进行加液和 Liquid Handling 作业。需要 Touch Control 或连至安装有 OMNIS Software、tiamo™、MagIC Net, viva 或 797 VA Computrace 的计算机进行操作。	