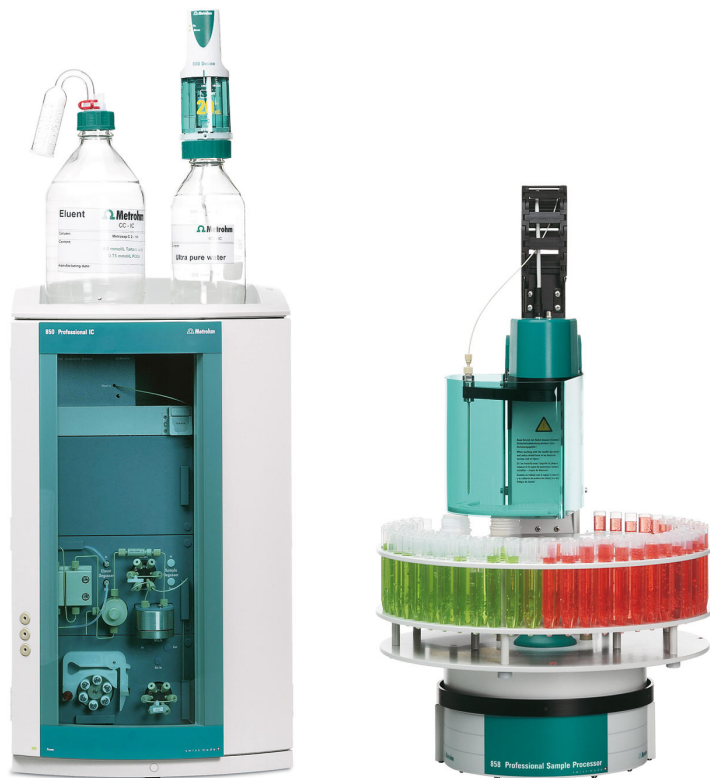




«ProfIC 9 – Cation» – 带有英蓝校正、英蓝样品浓缩和英蓝基质消除的 Professional IC 系统，可进行痕量分析

ProfIC-09-Cation

该离子色谱仪系统具有电导检测功能，可对基质复杂的样品中的阳离子或阴离子（非抑制型）进行超痕量分析，可达最低的 ppt 级（ng/L）。«ProfIC 9» 带有万通英蓝 样品浓缩、英蓝 校正和基质消除设备，可使色谱系统免受基质影响，并保证分析用分离柱的使用寿命较长。

原理图

Scope of delivery ProfIC-09-Cation

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

Professional IC Vario 系统 (带万通智能英蓝浓缩技术、英蓝基质消除和电导率检测) 可实现复杂基质中的阳离子超痕量分析, 直至最低 ppt 范围 (ng/L)。

典型的应用领域:

- 核电厂和常规电厂中样品的超痕量分析
- 在萃取剂和有机物中的痕量和超痕量分析
- 雪和冰中的痕量分析

示意图

安装说明书



800 Dosino 驱动头, 带有可用于智能型加液单元的读/写硬件设备。带固定电缆。



用于智能型离子色谱仪的紧凑智能型高性能电导检测器。不凡的温度稳定性, 受保护的检测器端子板内的整个信号处理过程以及新一代的 DSP (数字式信号处理) 均能确保测量的准确性。归功于动态工作范围, 无需进行范围变更 (也不是自动进行)。



858 Professional Sample Processor 可处理体积在500 µL 至 500 mL 之间的样品。进行样品转移时, 既可以使用 850 Professional IC System 上的蠕动泵、也可通过 800 Dosino 来进行。



1 PCS

6.1014.200

Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 (捕获柱)

Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 捕获柱用于清除水溶剂中的离子杂质，即阳离子和阴离子杂质。建议将其用于清洁输送水，尤其用于 «MISP», 即 «Metrohm Inline Sample Preparation» (英蓝技术)。通过使用 Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 保护柱可大幅降低输送水对系统空白值的影响。



1 PCS

6.1825.280

转移泵管 PFA, 20 mL



1 PCS

6.3032.210

807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 10 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



1 PCS

6.5330.040

离子色谱渗析装备, 用于 Liquid Handling (灵快量化液体处理), 带 Dosino

用于将 Dosino 安装到 Liquid Handling (灵快量化液体处理) 的智能离子色谱仪上的附件组。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1010.310	Metrosep C PCC 1 HC/4.0 用于阳离子富集和基质消除	
6.1050.420	Metrosep C 4 - 150/4.0 Metrosep C 4 - 150/4.0 是阳离子分析中的通用型标准柱，可在短时间内进行高效分离。Metrosep C 4 - 150/4.0 分离柱是分析水性介质中的碱金属和碱土金属的选择。	
6.1050.500	Metrosep C 4 Guard/4.0 Metrosep C 4 Guard（保护柱）/4.0 含有 C-4 柱材料，用于保护所有基于硅胶载体材料的 Metrosep 阳离子柱。细小颗粒和杂质均会被挡住，由此将明显延长分析用分离柱的使用寿命。其优惠的价格也是一大优势。Metrosep C 4 Guard/4.0 也按照《On Column Guard System》来运行，将几乎无死点容积地直接安装到相应分离柱上。	
6.1608.080	试剂瓶 / 300毫升 IC样品处理器的冲洗瓶	

6.2041.390 样品架, 16 x 100 mL, (聚氯乙烯)

与 810 Sample Changer、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架, 用于 16 个样品杯。可使用以下样品杯: 100 mL 大口杯, 低形状。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2820.000 Al箔

1000张, 圆形, 直径80毫米。厚度: 0.010毫米。与6.2037.030铝箔支撑一起使用, 用于6.1432.210样品杯。用于674 KF样品转换器



6.5333.000 用于离子色谱的 IQ/OQ 套件

用于离子色谱的 IQ/OQ 套件包括了离子色谱中的 IQ/OQ 需要的所有部件和标准溶液。



6.5620.000 807 Dosing Unit 的接口套件: 端口 4

用于将 M6 软管连接 807 Dosing Unit 的端口 4 (从鲁尔过渡为 M6), 包括支架固定

