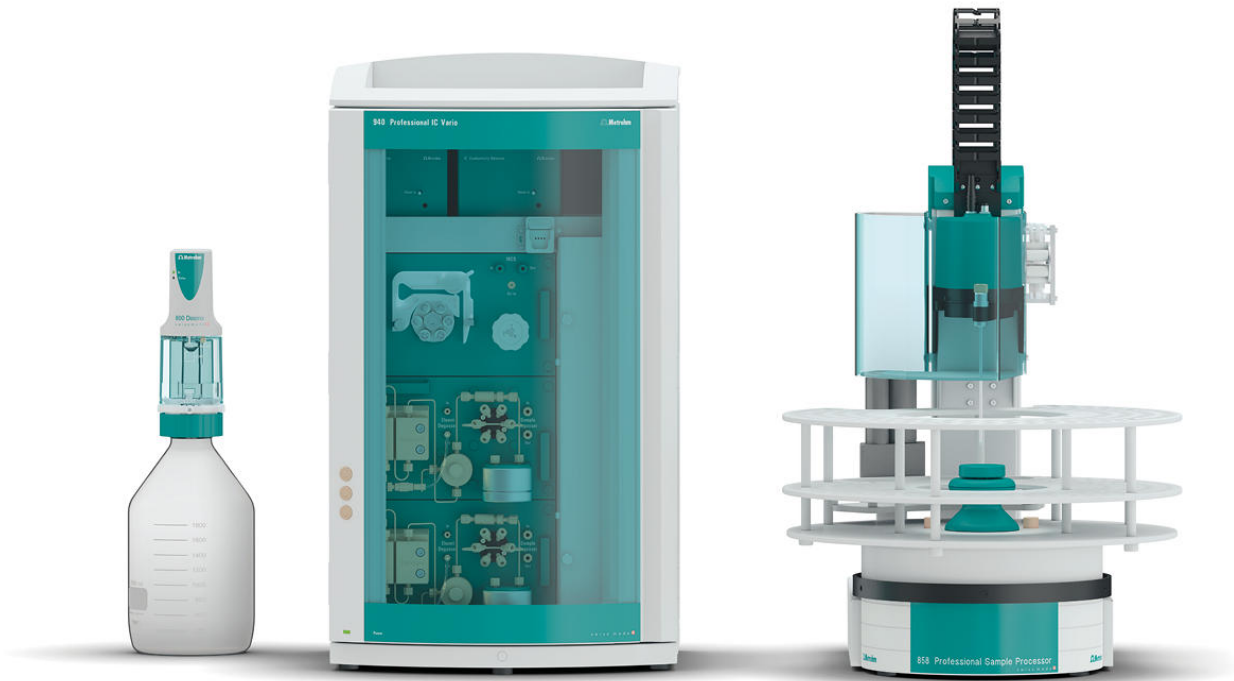




«ProfIC Vario 14 AnCat» – 带万通智能 Pick-up 进样工艺 (MiPuT) 的 Professional IC Vario 系统

ProfIC-Vario-14-AnCat

此 Professional-IC-Vario 系统（带万通智能 Pick-up 进样工艺 (MiPuT)、序列抑制法和电导检测）可对小样品量中的阴离子和阳离子进行测定。

典型的应用范围：

- 普遍适用于样品量较少的所有类型样品
- 生化过程研究
- 环境样品萃取

示意图

Scope of delivery ProfIC-Vario-14-AnCat

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 PCS

2.940.2500

940 Professional IC Vario TWO/SeS/PP

940 Professional IC Vario TWO/SeS/PP 是智能型双通道 IC 离子色谱仪器，带有序列抑制（单通道）和一个蠕动泵用于抑制器再生。该仪器可使用各种分离和检测方法。

典型的应用范围：

- 并行测定阴离子和阳离子的标准仪器
- 阴离子和阳离子的痕量分析
- 阴离子和阳离子的在线监控



2 PCS

2.850.9010

IC Conductivity Detector

用于智能型离子色谱仪的紧凑智能型高性能电导检测器。不凡的温度稳定性，受保护的检测器端子板内的整个信号处理过程以及新一代的 DSP（数字式信号处理）均能确保测量的准确性。归功于动态工作范围，无需进行范围变更（也不是自动进行）。



1 PCS

2.858.0020

858 Professional Sample Processor – Pump

858 Professional Sample Processor – Pump 可处理体积在 500 μ L 至 500 mL 之间的样品。进行样品转移时，既可以使用内置的双向双通道蠕动泵、也可通过 800 Dosino 来进行。



1 PCS

2.800.0010

800 Dosino多思 驱动头

800 Dosino 驱动头，带有可用于智能型加液单元的读/写硬件设备。带固定电缆。



1 PCS

6.5330.170

离子色谱装备: MiPuT

用于安装 Dosino 以进行 Pick-up (万通智能 Pick-up 进样工艺) 进样的附件组。



1 PCS

6.1825.290

PEEK 样品环 250 μ L

用于 «Metrohm intelligent Partial Loop Technique» (MiPT, 万通部分装液法进样技术) 和用于 PILS (particle into liquied sampler, 气体样品液化器)。带 2 个 PEEK (聚醚醚酮) 压力螺丝。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2041.480	样品架, 159 x 2 mL 和 3 x 300 mL, (聚氯乙烯) 与 858 Professional Sample Processor 适配的样品架, 用于 159 个样品容器和 3 个冲洗瓶。可使用以下样品容器: 2 mL (Eppendorf)、6.1608.080、6.1627.000。 塑料: 聚氯乙烯 (PVC)	
6.1050.420	Metrosep C 4 - 150/4.0 Metrosep C 4 - 150/4.0 是阳离子分析中的通用型标准柱, 可在短时间内进行高效分离。Metrosep C 4 - 150/4.0 分离柱是分析水性介质中的碱金属和碱土金属的选择。	
6.1050.500	Metrosep C 4 Guard/4.0 Metrosep C 4 Guard (保护柱) /4.0 含有 C-4 柱材料, 用于保护所有基于硅胶载体材料的 Metrosep 阳离子柱。细小颗粒和杂质均会被挡住, 由此将明显延长分析用分离柱的使用寿命。其优惠的价格也是一大优势。Metrosep C 4 Guard/4.0 也按照 «On Column Guard System» 来运行, 将几乎无死点容积地直接安装到相应分离柱上。	
6.2842.000	MSM-HC 马达 A 适用于所有带 MSM-HC (大容量万通抑制器模块) 的离子色谱仪的抑制器马达	

6.2844.000 MSM-LC 马达 A
抑制器马达，与 2 mm 分离柱一起使用



6.2832.000 MSM 转子 A
抑制器转子，用于所有带MSM的IC仪器。



6.2842.020 适配器套管，MSM

可在适配器套管的帮助下将 MSM Rotor A 和 MSM-LC Rotor A 安装在转子外壳中。



2.941.0010 941 Eluent Production Module

941 Eluent Production Module 可自动制备淋洗液。能够在无需人工干涉的情况下进行持续地不间断工作，并确保稳定的保留时间。可与所有的万通离子色谱仪组合应用，并由 MagIC Net 进行操控。



6.5330.090 离子色谱装备：Eluent Production Module 上的附加淋洗液设备

Eluent Production Modul 的附件组。包括扩展淋洗功能的所有部件。
液位传感器必须根据应用单独订购。



2.800.0010 800 Dosino多思 驱动头

800 Dosino 驱动头，带有可用于智能型加液单元的读/写硬件设备。带固定电缆。



6.2769.110 传感器 EMPTY（空），用于 2 L 瓶的液位传感器

该传感器安装在瓶盖 6.1626.000 中，告知液位传感器 EMPTY（空）状态，用于 2 L 瓶。包括两个传感棒，一条输出管和两个将该软管固定在其中一个传感棒上的支架。



用于控制所有智能型 Professional IC 系统、Compact IC 仪器及其外部设备，所有检测器和各种 Autosampler、800 Dosino、771 Compact Interface 的 Metrohm 专业色谱法软件。该软件可用于离子色谱分析的控制、数据采集、数据评估和监控，以及生成报告。

图形用户界面，用于常规操作、大量数据库程序、方法开发、配置和手动系统控制；灵活的用户管理、易用的数据库操作、大量数据输出功能、可个性化配置的报告生成器、控制和监控全部系统元件和色谱分析结果。

MagIC Net Professional 符合 FDA 准则 21 CFR 第 11 部分以及 GLP。

MagIC Net 提供 15 种对话框语言：德语、英语、中文、繁体中文、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、保加利亚语、捷克语、匈牙利语、日语、韩语、俄语、斯洛伐克语

该版本对图形用户界面进行了更新，还有话了 4K 监视器上用户界面的缩放和清晰度。

1 份许可证

将在一个 U 盘上提供安装文件和文献。



用于控制所有智能型 Professional IC 系统、Compact IC 仪器及其外部设备，所有检测器和各种 Autosampler、800 Dosino、771 Compact Interface 并具有客户端/服务器能力的 Metrohm 色谱法软件。该软件可用于离子色谱分析的控制、数据采集、数据评估和监控，以及生成报告。
数据和方法集中保存在服务器上。

图形用户界面，用于常规操作、大量数据库程序、方法开发、配置和手动系统控制；灵活的用户管理、易用的数据库操作、大量数据输出功能、可个性化配置的报告生成器、控制和监控全部系统元件和色谱分析结果。

MagIC Net Multi 符合 FDA 准则 21 CFR 第 11 部分以及 GLP。

MagIC Net 提供 15 种对话框语言：德语、英语、中文、繁体中文、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、保加利亚语、捷克语、匈牙利语、日语、韩语、俄语、斯洛伐克语

该版本对图形用户界面进行了更新，还有话了 4K 监视器上用户界面的缩放和清晰度。

公司内部网络外带服务器的客户端服务器系统的性能也得到了优化。

客户端服务器版本带 3 份许可证

