


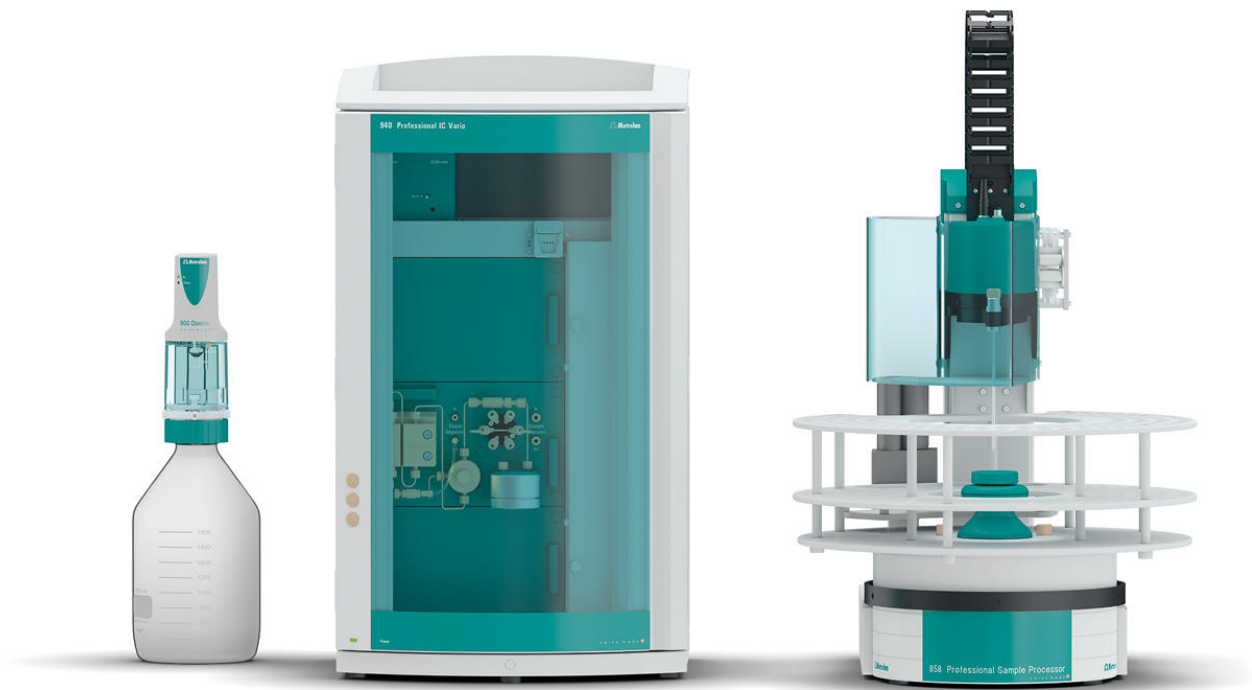

«ProfIC Vario 14 Cation» – 带万通智能 Pick-up 进样工艺 (MiPuT) 的 Professional IC Vario 系统

ProfIC-Vario-14-Cation

此 Professional IC Vario 系统（带万通智能 Pick-up 进样工艺 (MiPuT) 和电导率检测）可对小样品量中的阳离子或阴离子（非抑制）进行测定。

典型的应用领域：


- 普遍适用于样品量较少的所有类型样品
- 生化过程研究
- 环境样品萃取

示意图

安装说明书

Scope of delivery ProfIC-Vario-14-Cation

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	2.940.1100	940 Professional IC Vario ONE
940 Professional IC Vario ONE 是智能型的 IC 仪器，用于无抑制应用。该仪器可使用各种分离和检测方法。 典型的应用范围： • 阴离子或阳离子测定，无抑制 • 使用 UV/VIS 检测的分析，带或不带柱后衍生反应 • 使用安培检测法的应用（例如糖份分析） • 使用 MiPCT 进行阳离子痕量分析		
1 PCS	2.850.9010	IC Conductivity Detector
用于智能型离子色谱仪的紧凑智能型高性能电导检测器。不凡的温度稳定性，受保护的检测器端子板内的整个信号处理过程以及新一代的 DSP（数字式信号处理）均能确保测量的准确性。归功于动态工作范围，无需进行范围变更（也不是自动进行）。		
1 PCS	2.858.0020	858 Professional Sample Processor – Pump
858 Professional Sample Processor – Pump 可处理体积在 500 µL 至 500 mL 之间的样品。进行样品转移时，既可以使用内置的双向双通道蠕动泵、也可通过 800 Dosino 来进行。		
1 PCS	2.800.0010	800 Dosino多思 驱动头
800 Dosino 驱动头，带有可用于智能型加液单元的读/写硬件设备。带固定电缆。		

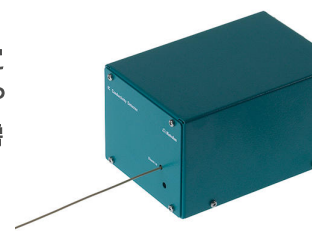

用于安装 Dosino 以进行 Pick-up（万通智能 Pick-up 进样工艺）进样的附件组。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2041.480	样品架, 159 x 2 mL 和 3 x 300 mL, (聚氯乙烯)	
	与 858 Professional Sample Processor 适配的样品架, 用于 159 个样品容器和 3 个冲洗瓶。可使用以下样品容器: 2 mL (Eppendorf)、6.1608.080、6.1627.000。 塑料: 聚氯乙烯 (PVC)	
6.1050.420	Metrosep C 4 - 150/4.0	
	Metrosep C 4 - 150/4.0 是阳离子分析中的通用型标准柱, 可在短时间内进行高效分离。Metrosep C 4 - 150/4.0 分离柱是分析水性介质中的碱金属和碱土金属的选择。	
6.1050.500	Metrosep C 4 Guard/4.0	
	Metrosep C 4 Guard (保护柱) /4.0 含有 C-4 柱材料, 用于保护所有基于硅胶载体材料的 Metrosep 阳离子柱。细小颗粒和杂质均会被挡住, 由此将明显延长分析用分离柱的使用寿命。其优惠的价格也是一大优势。Metrosep C 4 Guard/4.0 也按照 «On Column Guard System» 来运行, 将几乎无死点容积地直接安装到相应分离柱上。	
2.941.0010	941 Eluent Production Module	
	941 Eluent Production Module 可自动制备淋洗液。能够在无需人工干涉的情况下进行持续地不间断工作, 并确保稳定的保留时间。可与所有的万通离子色谱仪组合应用, 并由 MagIC Net 进行操控。	

该传感器安装在瓶盖 6.1626.000 中，告知液位传感器 EMPTY（空）状态，用于 2 L 瓶。包括两个传感棒，一条输出管和两个将该软管固定在其中一个传感棒上的支架。



6.6059.422 MagIC Net 4.2 Professional: 1 份许可证

用于控制所有智能型 Professional IC 系统、Compact IC 仪器及其外部设备，所有检测器和各种 Autosampler、800 Dosino、771 Compact Interface 的 Metrohm 专业色谱法软件。该软件可用于离子色谱分析的控制、数据采集、数据评估和监控，以及生成报告。



图形用户界面，用于常规操作、大量数据库程序、方法开发、配置和手动系统控制；灵活的用户管理、易用的数据库操作、大量数据输出功能、可个性化配置的报告生成器、控制和监控全部系统元件和色谱分析结果。

MagIC Net Professional 符合 FDA 准则 21 CFR 第 11 部分以及 GLP。

MagIC Net 提供 15 种对话框语言：德语、英语、中文、繁体中文、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、保加利亚语、捷克语、匈牙利语、日语、韩语、俄语、斯洛伐克语

该版本对图形用户界面进行了更新，还有话了 4K 监视器上用户界面的缩放和清晰度。

1 份许可证

将在一个 U 盘上提供安装文件和文献。

用于控制所有智能型 Professional IC 系统、Compact IC 仪器及其外部设备，所有检测器和各种 Autosampler、800 Dosino、771 Compact Interface 并具有客户端/服务器能力的 Metrohm 色谱法软件。

该软件可用于离子色谱分析的控制、数据采集、数据评估和监控，以及生成报告。

数据和方法集中保存在服务器上。

图形用户界面，用于常规操作、大量数据库程序、方法开发、配置和手动系统控制；灵活的用户管理、易用的数据库操作、大量数据输出功能、可个性化配置的报告生成器、控制和监控全部系统元件和色谱分析结果。

MagIC Net Multi 符合 FDA 准则 21 CFR 第 11 部分以及 GLP。

MagIC Net 提供 15 种对话框语言：德语、英语、中文、繁体中文、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、保加利亚语、捷克语、匈牙利语、日语、韩语、俄语、斯洛伐克语

该版本对图形用户界面进行了更新，还有话了 4K 监视器上用户界面的缩放和清晰度。

公司内部网络外带服务器的客户端服务器系统的性能也得到了优化。

客户端服务器版本带 3 份许可证

