



TitriC Vario pro III – 专业的离子色谱仪器和滴定装置的组合系统，带有可封闭的样品容器

TitriC Vario pro III

TitriC Vario pro III – 专业解决方案，带有封闭的样品容器。

全自动系统，用于直接测量温度、电导和 pH 值；滴定法测定 p 和 m 值；离子色谱法测定包括钙和镁的阳离子以及阴离子。自动进样器配备了 DisCover 功能，可自动取下样品容器盖。

系统组成如下：856 Conductivity 模块、两个 800 Dosino、802 Stirrer（棒式搅拌器）、905 Titrando、815 Robotic USB Sample Processor XL 以及一台 940 Professional IC Vario TWO /SeS/PP，带两个电导检测器 «iDetector»，用于阴离子（序列抑制法）和阳离子。

TitriC Vario – 离子分析的 Powerpack 加强版。

Scope of delivery TitriC Vario pro III

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 PCS

2.940.2500

940 Professional IC Vario TWO/SeS/PP

940 Professional IC Vario TWO/SeS/PP 是智能型双通道 IC 离子色谱仪器，带有序列抑制（单通道）和一个蠕动泵用于抑制器再生。该仪器可使用各种分离和检测方法。

典型的应用范围：

- 并行测定阴离子和阳离子的标准仪器
- 阴离子和阳离子的痕量分析
- 阴离子和阳离子的在线监控



1 PCS

6.2832.000

MSM 转子 A

抑制器转子，用于所有带MSM的IC仪器。



1 PCS

6.2842.020

适配器套管，MSM

可在适配器套管的帮助下将 MSM Rotor A 和 MSM-LC Rotor A 安装在转子外壳中。



2 PCS

2.786.0040

786摆头

不带滴定头部或移液头部的机器人样品处理器XL的附件



2 PCS 2.800.0010 800 Dosino多思 驱动头

800 Dosino 驱动头，带有可用于智能型加液单元的读/写硬件设备。带固定电缆。



1 PCS 2.802.0010 802 Stirrer, 适用于 727 Ti Stand

棒式搅拌器，包括单独转速调节器 6.2137.000 和搅拌螺旋桨 6.1909.010。



1 PCS 2.815.0110 815 Robotic USB Sample Processor XL (2T/2P)

Robotic USB Sample Processor XL 包括两个工作站和两台内置的隔膜泵，可用于自动处理大量常规样品系列以及完成复杂样品前处理或并列处理流程。除了内置的泵之外，还可再连接多达两台泵（隔膜泵或蠕动泵）和三台加液器用来进行 LQH 加液处理。

由于其应用范围很广，因此必须根据具体应用来选择合适的样品盘、搅拌器、滴定头、机械臂和 Swing Head 以及样品容器并单独订购。

通过 Touch Control 实现单机控制。有以下 PC 控制用软件产品可供选择：滴定软件 tiamo™、色谱分析软件 MagIC Net、伏安法软件 viva 或 OMNIS。



电导率测量模块作为现有 Titrand 系统的扩展设备或作为«独立设备»与 900 Touch Control 一起使用。通过 856 Conductivity Module 模块即可测定电导和温度也可测定总溶解固体值和盐度。它也支持五环电导电极。

该 Conductivity Module 有 2 个 USB 接口，用于连接打印机、条形码读取器或自动进样器，以及 4 个 MSB 接口用于连接搅拌器或 Dosino。使用 OMNIS-Software、tiamo-软件或 Touch Control。如果需要，满足 GMP/GLP 和 FDA 要求，比如 21 CFR 第 11 部分。



用于使用 Dosino 加液系统通过一个测量接口滴定分析的电位滴定仪。

- 多达四套 800 Dosino 加液系统
- 动态等当点滴定 (DET)、等量等当点滴定 (MET) 和终点设定滴定 (SET)
- 使用离子选择性电极测量 (MEAS CONC)
- 带监控的加液功能, LQH
- 用于额外搅拌器或加液器系统的四个 MSB 接口
- 智能电极“iTrode”
- USB 接口
- 使用 OMNIS-Software、tiamo-软件或 Touch Control
- 如果需要，满足 GMP/GLP 和 FDA 要求，比如 21 CFR 第 11 部分



集成了传感器数据存储芯片和 Pt1000 温度传感器的用于在离子含量低的含水介质（例如，饮用水、工艺用水）中进行 pH 测量/滴定的数字组合 pH 电极。这种电极在这些样品中显示出非常快的反应时间。

固定磨口隔膜对污染不敏感。

当使用 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol / L}$ 作为中间电解质时，建议在储存溶液中储存。

中间电解质可以用不含氯离子的电解质（例如，硝酸钾 $c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$ (6.2310.010)）代替。存储在用过的电解质中。

iTrodes 可用于 Titrand, Ti-Touch 或 913/914 米。



1 PCS

6.0915.100

5 环电导电极 $c = 0.7 \text{ cm}^{-1}$, 带 Pt1000 (固定电缆)

带池常数的 5 环电导电极 $c = 0.7 \text{ cm}^{-1}$ (指导数值), 集成有温度探针 Pt1000 和固定电缆 (1.2 m), 用于连接到 856 电导率模块上。

该传感器适用于测量中等的电导率 ($5 \mu\text{S}/\text{cm}$ 至 $20 \text{ mS}/\text{cm}$), 例如:

- 饮用水
- 地表水
- 废水



1 PCS

6.1414.060

微型滴定杯上部/ ECO



1 PCS

6.1415.250

滴定杯 / 50至150毫升



1 PCS

6.1462.040

机器人臂, 带移液型滴定头, 用于786型摇摇头, 向
右摆动

用于液体操作的移液型机器人臂



1 PCS

6.1462.080

机械臂 Dis-Cover

Schwenkarm zum Be- und Entdecken von Probengefäßen (75 und 250 mL, Deckel 6.2037.050 und 6.2037.060) auf dem Probenrack eines Robotic Sample Processors. Der Arm wird mit einem 786 Swing Head verwendet. Verhindert schlechte Gerüche, Verdunstung und Verunreinigungen.



1 PCS

6.1543.170

抽吸尖管/螺纹 M8

用于样品处理器的抽吸尖管。



1 PCS

6.1608.030

试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45




1 PCS

6.1618.020

S 40螺纹口连接到GL45接口的螺纹转接器

将带S40螺纹的试剂瓶（Merck等厂家生产）连接到GL45接口的转接器

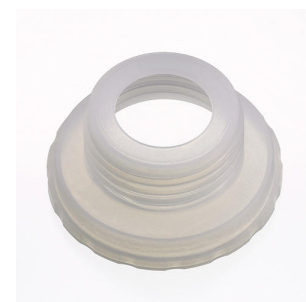

1 PCS

6.1805.030

FEP管 / M6 / 150厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS

6.1805.110

FEP管 / M6 / 80厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS

6.1805.510

PTFE（聚四氟乙烯）管 / M8 / 60 cm

带弯折保护。



1 PCS

6.1805.010

FEP管 / M6 / 13厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1808.060 T 形连接头 / M6 内部

3 个螺纹 M6 内部。



1 PCS 6.1808.280 807 Dosing Unit 端口 4 的适配器，M6 内部

用于使用 807 Dosing Unit 端口 4 的适配器，用于与一根 FEP 软管 / M6 相连。




1 PCS 6.2001.070 样品处理器的测定台（support stand）

样品处理器的测定台（support stand），可用于外部滴定及稀释（IC）



1 PCS 6.2057.210 Holder for Dosino to IC instruments

Halter zur Befestigung von Dosinos am Gehäuse von IC Geräten.

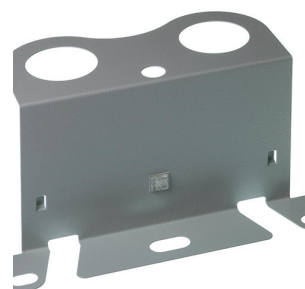

1 PCS

6.2134.040

连接电缆 RS-232 DB9 - IBM-PC(DB9)

用于连接 Metrohm RS-232 接口和计算机。用于 Titrino、Titrimo plus 和 756, 831 KF Coulometer、RS-232/USB-Box




1 PCS

6.2148.050

USB/RS -232 转换器，用于 900 Touch Control

可将 900 Touch Control 扩展一个 RS-232 接口，用于连接例如天平。

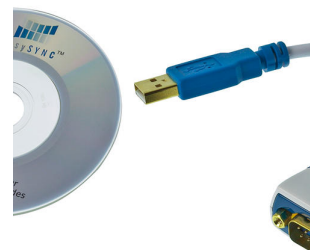

2 PCS

6.2151.000

电缆 USB A – Mini-DIN 插口 8 针

控制器电缆。



1 PCS

6.2307.230

缓冲溶液，pH 4, 7与9

混合缓冲液，pH 4.00/7.00/9.00 (25°C)，装于单次使用的小袋中，无色，盒装，每盒3 x 10 x 30 毫升



1 PCS

6.2325.000

pHit kit

pH电极的维护套件该套件包括:- 50 mL 清洗液- 50 mL 3M KCl 溶液- 50 mL 储藏液- 2 储存容器- 使用说明



1 PCS

6.2629.000

IC 针架的螺母

用于 Sample Processor。



1 PCS

6.2709.090

塞子

PTFE. 用于 6.5613.000 ECO 滴定装置



1 PCS

6.2730.020

带垫片的塞子 (Septum stopper)

带E.301.0041 O型密封圈。用于 6.1448.010 垫片和 6.1414.030 滴定杯盖。用于卡尔费休应用



5 PCS

6.2730.030

塞子

全套带有接头和 O 型圈。用于滴定杯上部部件 6.1414.030。用于 KF 仪器、VA 测量台、VA Computrace 和 IC 稀释。



3 PCS

6.2730.060

螺纹接套

PCTFE. 带M16螺纹。用于 6.5613.000 ECO 滴定装置



1 PCS

6.2730.080

螺纹接套

PCTFE. 用于带722型搅拌器的 6.5613.000 ECO 滴定装置



1 PCS

6.2744.070

压力螺丝（短）

较短的版本。带UNF 10/32接口。5件装。PEEK泵头的备用件。



2 PCS 6.2744.080 螺纹 M6 / UNF 10/32 适配器

带 M6 外螺纹。用于离子色谱仪器。



1 PCS 6.2763.000 流通池，用于 6.0915.100/6.0920.100

流通池，用于 6.0915.100/6.0920.100 5 环电导测量池



1 PCS 6.2833.020 针固定器，1/8英寸。带M6管连接

用于样品处理器。用于FEP管与M6连接器之间的连接



1 PCS 6.3032.220 807 Dosing Unit 20 mL

807 Dosing Unit，带内置的数据芯片，20 mL 玻璃计量筒和遮光罩，可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



1 PCS 6.3032.250 807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 50 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



2 PCS 2.850.9010 IC Conductivity Detector

用于智能型离子色谱仪的紧凑智能型高性能电导检测器。不凡的温度稳定性, 受保护的检测器端子板内的整个信号处理过程以及新一代的 DSP (数字式信号处理) 均能确保测量的准确性。归功于动态工作范围, 无需进行范围变更 (也不是自动进行)。



1 PCS 6.1543.210 三通塞子, 带防扩散阀

塞子, 带三只滴定头, 用于连接3根 M6 的小管



1 PCS 2.854.0010 854 iConnect

854 iConnect - 智能电极 «iTrodes» 专用电极电缆和测量放大器 (电缆长度 150 cm)。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2041.800	样品架, 100 x 75 mL, (聚氯乙烯) 与 815 Robotic Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Basic" 适配的样品架, 用于 100 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1432.210, 6.1459.400。 塑料: 聚氯乙烯 (PVC)	
6.2041.810	样品架, 34 x 150 mL, (聚氯乙烯) 与 815 Robotic Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Basic" 适配的样品架, 用于 34 个样品杯。可使用以下样品杯: 150 mL 大口杯 (高形状)。 塑料: 聚氯乙烯 (PVC)	
6.2041.830	样品架, 28 x 200 mL, (聚氯乙烯) 与 815 Robotic USB Sample Processor XL, 855 Robotic Titrosampler «Basic» 适配的样品架, 用于 28 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1459.310。 塑料: 聚氯乙烯 (PVC)	
6.2041.820	样品架, 28 x 250 mL, (聚氯乙烯) 与 815 Robotic Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Basic" 适配的样品架, 用于 28 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.14332.320、6.1432.323、6.1453.220、6.1453.250。 塑料: 聚氯乙烯 (PVC)	

6.2041.840 样品架, 59 x 120 mL, (聚氯乙烯)

与 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler «Basic» 适配的样品架, 用于 59 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1459.300、6.1459.307。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.1432.210 透明玻璃材质的样品杯 75 mL, 1 个

透明玻璃材质的样品杯 75 mL, 适用于样品架 6.2041.340、6.2041.350、6.2041.800 和 6.2041.900, 1 个



6.1432.320 透明玻璃材质的样品杯 250 mL, 1 个

透明玻璃材质的样品杯 250 mL, 适用于样品架 6.2041.310、6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、6.2041.820、6.2068.020 和 6.2068.030, 1 个



6.1459.300 塑料材质的样品杯 (PP) 120 mL, 250 个

塑料材质的样品杯 (聚丙烯, PP) 120 mL, 适用于样品架 6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、6.2068.020、6.2068.030 和 6.9920.141, 250 个

