



# VoltIC pro I – 是 IC 仪器和伏安装置的组合系统，用于同时测定阴离子、阳离子和重金属

## VoltIC pro I

VoltIC pro I 是 IC 仪器和伏安装置的最佳组合，可同时测定阴离子、阳离子和重金属。MagIC Net™ 负责控制 IC 仪器，并启动伏安法测定。以及对 IC 仪器和伏安装置的所有结果汇总。

## Scope of delivery VoltIC pro I

| Qt.   | Order no.  | Description              |
|-------|------------|--------------------------|
| 2 PCS | 2.850.9010 | IC Conductivity Detector |

用于智能型离子色谱仪的紧凑智能型高性能电导检测器。不凡的温度稳定性，受保护的检测器端子板内的整个信号处理过程以及新一代的 DSP（数字式信号处理）均能确保测量的准确性。归功于动态工作范围，无需进行范围变更（也不是自动进行）。



4 PCS      2.800.0010      800 Dosino多思 驱动头

800 Dosino 驱动头，带有可用于智能型加液单元的读/写硬件设备。带固定电缆。



1 PCS      2.843.0140      843 VA Peristaltic Pump Station, 用于紧凑型 VA 系统

843 蠕动泵站有两个内置的蠕动泵，可直接由 797 伏安极谱仪借助远程控制信号来控制这两个泵。可自动冲洗并在 VA 和 CVS 系统中通过 797 VA Computrace 半自动及全自动清空量杯。

用于伏安测量的仪器型号中包含了自动冲洗和清空量杯的完整配件。



1 PCS      2.858.0020      858 Professional Sample Processor – Pump

858 Professional Sample Processor – Pump 可处理体积在 500  $\mu$ L 至 500 mL 之间的样品。进行样品转移时，既可以使用内置的双向双通道蠕动泵、也可通过 800 Dosino 来进行。



1 PCS      6.1602.150      瓶盖 / GL 45 - 3 x UNF 10/32

用于 1/16 英寸毛细管接口连接。应用在 MSM 助溶剂以及万通在线渗析中。



1 PCS

6.1608.030

试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45



2 PCS

6.1608.050

卡氏炉干燥瓶 / 100毫升 / GL 45



1 PCS

6.1608.070

淋洗液瓶 / 2升 / GL 45



2 PCS

6.1618.060

螺纹转接头 / GL 45 转 GL 45

螺纹转接头（GL 45 转 GL 45）；主要用于带有升高法兰的试剂瓶



1 PCS

6.1803.030 PTFE 毛细管, 内径 0.5 毫米 / 3 米

毛细管, 用于在线渗析, 用在渗析单元、渗析式IC样品处理器、IC液体处理渗析单元上



---

1 PCS

6.1803.150 PTFE Capillary i.d. 0.25 mm / 1 m



---

1 PCS

6.1805.530 FEP管 / M6 / 2米

带光照保护和扭折保护



---

1 PCS

6.1808.280 807 Dosing Unit 端口 4 的适配器, M6 内部

用于使用 807 Dosing Unit 端口 4 的适配器, 用于与一根 FEP 软管 / M6 相连。



2 PCS

6.1819.010 聚四氟乙烯管


作为 VA Stand 的洗气瓶的气体入口



1 PCS

6.1822.410 PEEK连接毛细管


连接毛细管，用在样品转换器上进行样品转移，1 x M6，内径 0.5毫米，用于痕量分析

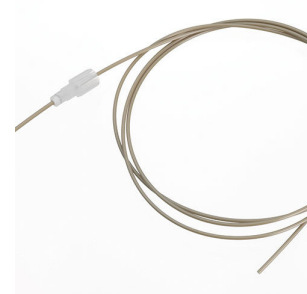

1 PCS

6.1826.020 PVC 泵管（蓝色/蓝色）

用于在线IC分析仪及伏安测定法的自动化

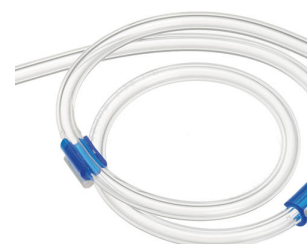

1 PCS

6.1831.070 PEEK 毛细管，内径 0.75 毫米，70 厘米

For Advanced VA Sample Processor




1 PCS

6.2041.450

样品架, 56 x 11 mL 和 56 x 50 mL, (聚氯乙烯)

与 858 Professional Sample Processor、815 Robotic USB Sample Processor XL 适配的样品架, 用于 112 个样品容器。可使用以下样品容器: 6.2743.050、6.2747.010、6.2743.040、50 mL Sarstedt 小管。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)

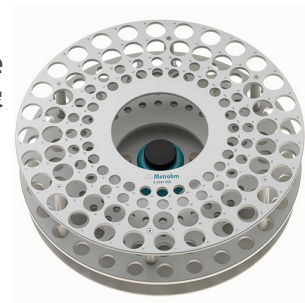

1 PCS

6.2055.100

试剂瓶固定器, 双瓶

试剂瓶固定器, 用于2只1升的试剂瓶。用于6.5617.000吸液设备



1 PCS

6.2057.040

固定器, 用于838自动样品处理系统的 Dosino多思  
数字计量瓶顶加液器

固定器, 用于838万思得稀释型离子色谱样品处理系统与838自动样品处理系统的 Dosino多思 数字计量瓶顶加液器



1 PCS

6.2134.100

电缆 / 5 米 / RS232 DB9 - IBM-PC (DB9)

用于连接瑞士万通RS232接口 - Titrino, 756卡尔费休库仑水份测定仪, 762或771型IC接口, 790 Personal IC



1 PCS

6.2148.010 远程盒, MSB


另外的远程接口, 用于连接可通过远程线控制的装置。带有永久连接的电缆。



2 PCS

6.2148.050 USB/RS -232 转换器, 用于 900 Touch Control

可将 900 Touch Control 扩展一个 RS-232 接口, 用于连接例如天平。

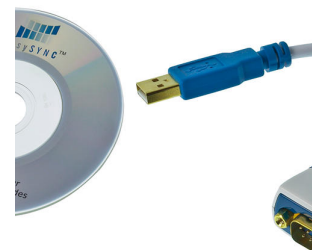

1 PCS

6.2743.057 样品容器 11 mL

200 件。用于 IC Sample Processors 和 VA Autosampler。

IC 样品容器材质为聚丙烯 (PP) 塑料, 面向医疗保健应用。生产和包装均在无菌和洁净室条件下进行 (洁净室等级 7, 依照 DIN ISO 14644 标准)。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。



1 PCS

6.2743.077 塞子, 其上有穿孔

200只。用于IC样品处理器



1 PCS      6.2744.034      2 个 Olive/UNF 10/32 两通

连接压力螺丝和泵管。2 个。用于带有蠕动泵的离子色谱仪。



---

1 PCS      6.2744.070      压力螺丝（短）

较短的版本。带UNF 10/32连接口。5件装。PEEK泵头的备用件。



---

3 PCS      6.2744.080      螺纹 M6 / UNF 10/32 适配器

带 M6 外螺纹。用于离子色谱仪器。



---

1 PCS      6.2747.010      样品管 50 mL

带蓝色螺纹密封件和 mL 刻度。每套 25 个。



2 PCS                      6.3032.120                      807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 2 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



---

2 PCS                      6.3032.210                      807 Dosing Unit 10 mL


807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 10 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



---

1 PCS                      6.5620.000                      807 Dosing Unit 的接口套件: 端口 4

用于将 M6 软管连接 807 Dosing Unit 的端口 4 (从鲁尔过渡为 M6), 包括支架固定

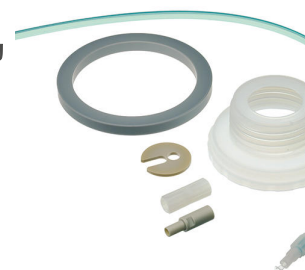

---

1 PCS                      6.2141.290                      连接电缆 843 泵单元 - 838 万思得样品处理系统

用于远程连接 843 泵单元和 838 自动样品处理系统的电缆。

